

Butterfly iQ™ personligt ultralydssystem

Brugervejledning



Delnummer: 950-20002-DA
Udskrivningsdato: 2019-08-22
Revision: S

Meddelelse

Butterfly Network, Inc. (BNI), er ikke ansvarlig for fejl i dette dokument eller for inkrementelle skader eller følgeskader i forbindelse med indretning, ydelse eller brug af dette materiale.

Navnebeskyttede oplysninger

Dokumentet indeholder navnebeskyttede oplysninger, der er beskyttet af ophavsret.

Begrænset garanti

Den "begrænsede garanti", der leveres sammen med BNI-produkter, tjener som den eneste og eksklusive garanti fra BNI for så vidt angår de heri indeholdte produkter.

Ophavsret

Copyright © 2019 Butterfly Network, Inc.
Alle rettigheder forbeholdes.

Anerkendelse af varemærker

Produktnavne, der er nævnt i denne vejledning, kan være varemærker, som tilhører deres respektive ejere.

Producent

Butterfly Network, Inc.
530 Old Whitfield Street
Guilford, CT 06437 USA

Telefon: +1 (855) 296-6188

FAX: +1 (203) 458-2514

Generelle forespørgsler: info@butterflynetwork.com

Support og service: support@butterflynetwork.com

Hjemmeside: www.butterflynetwork.com



Amerikanske patenter

Liste over gældende amerikanske patenter i overensstemmelse med 35 U.S.C. §287:
www.butterflynetwork.com/patents

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er angivet.

Kapitel 1: Indledning

Oversigt	1-1
Oversigt over Butterfly Cloud	1-1
Tiltænkt brug	1-1
Indikationer	1-2
Kontraindikationer	1-2
Uddannelse	1-2

Kapitel 2: Sikkerhedsinformation

Sikkerhedskonventioner	2-1
Fordele og risici ved ultralydsbehandling	2-1
Fordele ved ultralydsscanning	2-1
Risici forbundet med ultralyd	2-2
Butterfly iQ™ Sikkerhed	2-2
Grundlæggende sikkerheds-/anvendelsesmiljø	2-3
Elsikkerhed	2-4
Sikkerhed ved defibrillering	2-5
Udstyrsbeskyttelse	2-5
Biologisk sikkerhed	2-6
Operatørens sikkerhed	2-6

Kapitel 3: Systemoversigt

Oversigt	3-1
Modusser	3-1
Målinger	3-1
Sondetyper	3-2
Beskyttelse af patientdata	3-2
Internetkonnektivitet	3-2
Systemkomponenter	3-3
Butterfly iQ™-app	3-3
Sonde	3-4
Sondens batterioplader	3-5
Oversigt over brugergrænsefladen	3-6
Forudindstillinger	3-8

Kapitel 4: Opstilling af systemet

Hentning og installation af appen	4-1
Opdatering af firmware	4-2
Håndtering af app-opdateringer	4-2
Navigering af appen	4-3
Brug af berøringsskærmen	4-3
Åbning og lukning af appen	4-3
Logge på og af appen	4-3
Glemte adgangskode	4-4
Konfigurering af dine systemindstillinger	4-4

Konfigurering af forudindstillinger	4-5
Anvendelse af hjælp	4-5
Opladning af sonden	4-6
Kontrol af batteriniveau	4-8

Kapitel 5: Butterfly Cloud Enterprise

Butterfly Cloud Enterprise, funktionalitet	5-1
Butterfly-domæner	5-1
Enkeltlogon (SSO)	5-1
Brugertilpasset timeout for inaktivitet	5-1
Enterprise Mobile Management	5-2
Flådeadministration	5-2

Kapitel 6: Anvendelse af systemet

Opstart af ny undersøgelse	6-1
Indtastning af patientdata	6-2
Manuel tilføjelse af patientoplysninger	6-2
Tilføjelse af patientoplysninger fra en arbejdsliste	6-3
Tilføjelse af en undersøgelsesbeskrivelse	6-3
Optagelse og registrering af billeder	6-3
Optagelse af billeder	6-3
Optagelse af et klip	6-3
Brug af optageenheden	6-4
Brug af funktioner og værktøjer	6-4
Justering af forstærkning, dybde og TGC	6-4
Brug af Pan (Panorering) og Zoom	6-5
Frysning og frigørelse af et billede	6-6
Gennemgang af rammer fra et frosset billede	6-6
Brug af midterlinjen	6-7
Lagring af en undersøgelse – Overførsel til Butterfly Cloud	6-8

Kapitel 7: Anmærkninger

Tilføjelse af anmærkninger	7-1
Udførelse af en lineær måling	7-1
Udførelse af en ellipsemåling	7-2
Tilføjelse af tekstanmærkning	7-2

Kapitel 8: Automatisk estimering af ejektionsfraktioner

Oversigt over automatiske ejektionsfraktioner	8-1
Beregning af automatisk ejektionsfraktion på en ny undersøgelse	8-1
Redigering af en automatisk estimeret ejektionsfraktion	8-3
Sådan gemmes en automatisk estimeret ejektionsfraktion	8-4

Kapitel 9: Brug af farvedoppler

Oversigt over farvedoppler	9-1
--------------------------------------	-----

Adgang til farvedopplermodus.	9-1
Justering af regionen af interesse (ROI)	9-1
Justering af forstærkning, dybde og PRF.	9-2

Kapitel 10: Brug af Power Doppler

Oversigt over Power Doppler.	10-1
Anvendelse af Power Doppler-modus.	10-1
Justering af regionen af interesse (ROI)	10-1
Justering af farveforstærkning, -dybde og hastighedsskala	10-2

Kapitel 11: Brug af M-modus visning

Oversigt over M-modus visning	11-1
Adgang til M-modus	11-1
Brug af M-modus.	11-1
Justering af Sweep Speed (Sweep-hastighed), Gain (Forstærkning) og Depth (Dybde)	11-2
Udførelse af M-modus-målinger.	11-2

Kapitel 12: Overførsel af en undersøgelse

Oversigt	12-1
Butterfly Cloud	12-1
Overførsel af en undersøgelse	12-2
Visning af overførselsstatus	12-2
Visning af en overført undersøgelse	12-3
Tilføjelse og visning af kommentarer på billeder	12-4
Sletning af arkiveret undersøgelse	12-4

Kapitel 13: Brug af Butterfly Cloud

Oversigt	13-1
Opretter forbindelse til Butterfly Cloud	13-2
Oversigt over hovedskærm	13-2
Indstillinger	13-3
Konfigurering af kontoindstillinger.	13-3
Visning af organisationsindstillinger.	13-4
DICOM-forbindelser.	13-4
Medlemmer:.	13-6
Arkiver	13-7
Oprettelse af nyt arkiv	13-7
Valg af arkiv	13-7
Sletning af arkiv	13-7
Genoprettelse af et slettet arkiv.	13-8
Undersøgelser	13-9
Søgning efter en undersøgelse	13-9
Redigering af undersøgelsesoplysninger	13-10
Deling af en undersøgelse	13-10
Flytning af en undersøgelse mellem arkiver	13-11
Sletning af en undersøgelse	13-12

Genoprettelse af en slettet undersøgelse	13-12
Arbejde med billeder og klip.	13-13
Visning af billeder og klip.	13-13
Hentning af et billede eller et klip.	13-13
Meddelelsescenter	13-14

Kapitel 14: Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af sonden	14-1
Opbevaring og transport	14-1
Rengøring og desinfektion af sonden	14-2
Rengøring af sonden	14-2
Desinficering af sonden	14-4
Desinficering af mobilenheden	14-4
Opdatering af sonden og app-softwaren.	14-4
Udførelse af diagnostisk test på sonde	14-5

Kapitel 15: Fejlfinding

Fejlfinding.	15-1
-------------------	------

Kapitel 16: Opnåelse af support

Kontakt til support gennem Butterfly iQ™ appen.	16-1
Kontakt Butterfly Support.	16-1

Kapitel 17: Specifikationer

Krav til mobilenhed	17-1
Systemspecifikationer	17-2
Sondens batterioplader.	17-2
Anbefalede ultralydsgeler.	17-3
Driftsmiljø.	17-4
Elektromagnetisk konformitet (EMC)	17-4
Separationsafstande.	17-6
Akustisk udgangseffekt	17-8
Ultralydssikkerhed	17-8
Anvendte symboler	17-9
Målenøjagtighed	17-17
M-modus.	17-17
B-modus	17-17
Farvedoppler.	17-17
Sikkerhed	17-17
Genbrug og bortskaffelse	17-17
Elektrisk og elektronisk udstyrsaffald	17-18

Kapitel 18: Symboler

Symboler	18-1
Noter.	18-4

Kapitel 1

Indledning

Dette kapitel indeholder en introduktion til Butterfly iQ™ personligt ultralydssystem.

Oversigt

Butterfly iQ™ personligt ultralydssystem er designet til at være nemt at bruge, bærbart og batteridrevet. Den kommercielle brugerklare mobile platform (enhed) giver et simpelt interface til brugeren.

Denne vejledning er beregnet til at give information til at vejlede uddannede operatører i sikker og effektiv drift og korrekt vedligeholdelse af Butterfly iQ™ personligt ultralydsudstyr og tilbehør. Det er vigtigt, at du læser og forstår alle instruktioner i denne vejledning, inden de bruger enheden, og er fuldt ud opmærksomme på alle advarsler og forsigtighedsregler i denne vejledning.

Oversigt over Butterfly Cloud

Butterfly Cloud er en skylager-webapplikation, der skal gøre det muligt for brugere af Butterfly iQ™ iOS-mobilapplikationen at overføre undersøgelser (herunder billeder og klip) til et internetbaseret reolsystem. Brugere, der har adgang til Butterfly Cloud-webapplikationen, kan få adgang til det samme indhold, der er tilgængeligt for dem via deres Butterfly iQ™-konto, som kan deles mellem medlemmerne af en hel organisation.

Yderligere oplysninger findes på "Brug af Butterfly Cloud" på side 13-1.

Tiltænkt brug

Butterfly iQ™ er et generelt diagnostisk ultralydsbilleddannelsessystem til kvalificeret og uddannet sundhedspersonale med henblik på diagnostisk billeddannelse og måling af anatomiske strukturer og væske.



FORSIGTIG!

Ifølge amerikansk (USA) lov må denne anordning kun sælges af en læge eller efter ordination fra en læge.

Indikationer

Butterfly iQ™ er indiceret til brug for kvalificerede og uddannet sundhedspersonale med henblik på udførelse af diagnostisk ultralydsbilleddannelse og måling af anatomiske strukturer og væsker hos voksne og pædiatriske patienter til følgende kliniske anvendelser:

- Perifere kart (inklusive karotide og arterielle undersøgelser)
- Proceduremæssig vejledning
- Små organer (inklusive skjoldbruskkirtel)
- Hjerte
- Abdominal
- Urologisk
- Føtal/obstetrisk
- Gynækologisk
- Bevægeapparat (konventionel)
- Bevægeapparat (superficiel)

Produktet kan bruges i forskellige miljøer, såsom klinikker og hospitaler, til M-modus, B-modus og farvedoppler-funktioner.

Brug Butterfly iQ™ i overensstemmelse med alle sikkerhedsprocedurer og betjeningsvejledninger som beskrevet i denne vejledning og kun til de formål, som enheden var beregnet til.

Kontraindikationer

Butterfly iQ™ bør ikke anvendes til oftalmiske anvendelser.

Uddannelse

For at kunne betjene Butterfly iQ™ på sikker og effektiv vis skal brugeren opfylde følgende kriterier:

- Uddannelse i overensstemmelse med lokale, regionale og nationale bestemmelser
- Yderligere uddannelse i henhold til den ansvarlige læge
- En grundig viden og forståelse af det materiale, der er beskrevet i denne vejledning

Kapitel 2

Sikkerhedsinformation

Dette kapitel indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger om brug af Butterfly iQ™ og indeholder en liste over advarsels- og forsigtighedsmeddelelser. Denne brugervejledning er tilgængelig fra Butterfly iQ™-appen og gennem hjemmesiden (www.butterflynetwork.com). Yderligere oplysninger findes på "Butterfly iQ™-app" på side 3-3.

Sikkerhedskonventioner

Denne brugervejledning er beregnet til at hjælpe med sikker og effektiv drift af Butterfly iQ™. Det er vigtigt, at alle brugere gennemgår og forstår alle instruktioner i denne brugervejledning, inden de bruger enheden, og er fuldt ud opmærksomme på alle advarsler og forsigtighedsregler i denne vejledning.

Følgende konventioner anvendes i hele denne vejledning til at fremhæve sikkerhedsproblemer:



ADVARSEL:

Betingelser, farer eller usikker praksis, der kan medføre alvorlig personskade eller død.



FORSIGTIG!

Betingelser, farer eller usikker praksis, der kan medføre personskade, beskadigelse af enheden eller tab af data.

Fordele og risici ved ultralydsbehandling

Ultralyd anvendes i vid udstrækning, fordi det giver patienten mange kliniske fordele og har givet gode sikkerhedsmæssige resultater. Ultralydsscanning er blevet brugt i over tyve år, og der har ikke været nogen kendte langsigtede negative bivirkninger forbundet med denne teknologi.

Fordele ved ultralydsscanning

- Flere diagnostiske anvendelser
- Umiddelbare resultater
- Omkostningseffektivitet
- Bærbarehed
- Sikkerhedsmæssige resultater

Risici forbundet med ultralyd

Ultralydsbølger kan give en let opvarmning af vævet. Det er normalt, at sonden føles varm ved berøring under opladningen. Hvis du fjerner sonden fra opladningspladen før eller umiddelbart efter, at opladningen er færdig, anbefales det at lade sonden afkøle før brug. Da systemet begrænser patientens kontakttemperatur og ikke scanner ved eller over 43 °C (109 °F), så sonden kan afkøle før brug, optimerer resultatet under scanningstiden.

Butterfly iQ™ Sikkerhed



ADVARSLER!

- Butterfly iQ™ er beregnet til kompetente brugere, der er i stand til at fortolke billedkvalitet, diagnose og systemets klinisk anvendelighed.
 - Brug ikke Butterfly iQ™, før det materiale, der er indeholdt i denne vejledning, er gennemgået og fuldt ud forstået.
 - Brug ikke Butterfly iQ™ til andre formål end dem, der er beskrevet i denne vejledning.
 - Undlad at betjene Butterfly iQ™ forkert. Hvis dette undlades, kan det give anledning til alvorlig personskade eller død.
-

Grundlæggende sikkerheds-/anvendelsesmiljø

**ADVARSLER!**

- Brug kun kabler, sonder, opladere og tilbehør, der angives at være egnede til brug sammen med Butterfly iQ™. Udsiftning med ikke-godkendt tilbehør kan medføre, at systemet virker forkert eller forårsager skade på patienten eller operatøren.
 - Hvis sonden virker usædvanlig varm, afgiver lugt eller røg eller lækker, skal du straks indstille brugen. Træk sonden ud af mobilenheden, eller afbryd forbindelsen til den trådløse oplader (hvis relevant). Kontakt support. Se "Opnåelse af support" på side 16-1 for yderligere oplysninger.
 - Brug ikke Butterfly iQ™ nær brændbare gasser eller anæstetika. Det kan give anledning til brand eller eksplosion.
 - Butterfly iQ™ er ikke evalueret eller godkendt til anvendelse på farlige steder som fastlagt i den amerikanske standard National Electric Code. I overensstemmelse med IEC-klassificeringen må Butterfly iQ™ ikke anvendes nær brændbare stoffer/luftblandinger.
 - Brug ikke Butterfly iQ™-applikationen på en mobilenhed, der ikke opfylder mindstekravene. Hvis Butterfly iQ™-applikationen bruges på en mobilenhed, der ikke opfylder mindstekravene, kan det påvirke ydeevnen og billedkvaliteten og eventuelt medfører fejldiagnose.
 - Hvis der spildes væske i systemet, kan det beskadige systemet eller medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Der må ikke komme væske i enheden.
 - Opbevares kun under de miljøforhold, der er angivet i de tekniske specifikationer.
 - Der er farlig høj spænding og strøm. Der er ingen dele, som brugeren skal servicere. Forsøg ikke at åbne eller fjerne overdækning eller prøve at udføre reparation.
 - Bærbart og mobilt radiofrekvent (RF) -kommunikationsudstyr kan påvirke medicinsk elektrisk udstyr.
 - Brug af beskadiget udstyr eller tilbehør kan medføre, at enheden virker forkert, og/eller øve skade på patienten eller operatøren. Servicering skal udføres af kvalificeret servicepersonale.
 - Ingen modifikationer er tilladt. Undlad at modificere kabler, sonder, opladere eller tilbehør, der angives at være egnede til brug sammen med Butterfly iQ™. Modifikation på udstyr kan forårsage, at systemet ikke virker, som det skal, eller kan forårsage skade på patienten eller operatøren.
-

**FORSIGTIGHEDSREGLER!**

- Der er observeret forstyrrelser i hjerterytmen under ultralydsundersøgelser af hjertet, hvor der anvendes gas som kontrastmiddel, i det diagnostiske område for værdierne for det mekaniske indeks (MI). Se den specifikke indlæggsseddel for det anvendte kontrastmiddel for yderligere oplysninger.
- Butterfly Imaging Cloud muliggør fjernvisning af ultralydsbilleder på en række forskellige platforme og i ukontrollerede omgivelser (f.eks. omgivende belysning). Det er op til klinikerens at skønne, hvorvidt billeder det er hensigtsmæssigt at anvende billeder.
- Kun uddannede operatører må bruge instrumentet til anlæggelse af nåle.

Elsikkerhed

**ADVARSLER!**

- Undersøg sondens omhyggeligt før brug. Undersøg altid sonden før og efter rengøring, desinfektion eller brug. Undersøg linsens forside, kabel, hus, søm og stik for tegn på beskadigelser såsom revner, spåner, slid eller lækager. For at undgå risikoen for elektrisk fare må du ikke bruge sonden, hvis der er tegn på skade.
- Hvis sonden tabes, kan den blive beskadiget. Undersøg altid sonden før og efter rengøring, desinfektion eller brug. Undersøg linsens forside, kabel, hus, søm og stik for tegn på beskadigelser såsom revner, spåner, slid eller lækager. For at undgå risikoen for elektrisk fare må du ikke bruge sonden, hvis der er tegn på skade.
- IEC 60601-1 skal overholdes, når der bruges andet udstyr sammen med ultralydsapparatet.
- Brug af tilbehør, prober og kabler, bortset fra dem, som producenten af dette udstyr har angivet eller leveret, kan medføre øgede elektromagnetiske emissioner eller nedsat elektromagnetisk immunitet for dette udstyr og give anledning til fejlbehæftet drift.
- Brug af dette udstyr ved siden af eller stablet ovenpå andet udstyr skal undgås, da det kan medføre, at udstyret ikke fungerer korrekt. Hvis en sådan brug er nødvendig, skal dette og det andet udstyr observeres for at bekræfte, at de fungerer korrekt.
- Patienten eller operatøren kan udsættes for elektrisk stød, hvis spændingsniveauet overstiger IEC 60601-1 for dele, der anlægges på patienten.
- Sonden er designet til at opretholde forseglingen. Forsøg ikke at åbne sonden eller manipulere det indvendige i enheden, herunder batteriet. Det kan medføre, at patienten eller operatøren kommer til skade.
- Nedsæk ikke sonden mere end de angivne niveauer. Nedsækning ud over de angivne niveauer kan give anledning til elektrisk stød.

**FORSIGTIGHEDSREGLER!**

- Bærbart RF-kommunikationsudstyr (herunder periferiudstyr såsom antennekabler og eksterne antenner) bør ikke anvendes tættere end 30 cm (12 tommer) på nogen dele af Butterfly iQ™, herunder kabler specificeret af producenten. I modsat fald kan det medføre, at udstyrets ydeevne forringes.
- Meddelelser og advarsler fra andre tredjepartsprogrammer, der kører på mobilenheden, kan forstyrre undersøgelsen.
- Udstyrets emissionsegenskaber gør den egnet til brug i erhvervsområder og på hospitaler (CISPR 11, gruppe 1, klasse A). Hvis dette udstyr bruges i et boligmiljø (hvor der normalt kræves CISPR 11 klasse B), vil det muligvis ikke yde tilstrækkelig beskyttelse for radiofrekvente kommunikationstjenester. Brugeren kan være nødt til at træffe afhjælpende foranstaltninger, som f.eks. at flytte eller vende udstyret.

Sikkerhed ved defibrillering

**ADVARSLER!**

- Før du bruger en defibrillationspuls med en høj spænding på patienten, skal du fjerne alle anordninger, der har kontakt til patienten og ikke er angivet som defibrillationssikre.
- Sondeoverdækning giver ikke beskyttelse mod defibrillering.

Udstyrsbeskyttelse

**FORSIGTIGHEDSREGLER!**

- Bøj eller vrid ikke sondekablet for meget. Undersøg altid sonden før og efter rengøring, desinfektion eller brug. Undersøg linsens forside, kabel, hus, søm og stik for tegn på beskadigelser såsom revner, spåner, slid eller lækager. For at undgå risikoen for elektrisk fare må du ikke bruge sonden, hvis der er tegn på skade. Nedsænk ikke sonden i vand eller væske mere end de angivne niveauer.
- For at undgå muligheden for intern kondensering og mulig skade må enheden ikke opbevares uden for de angivne driftsmiljøforhold.
- Forkert vedligeholdelse kan medføre, at Butterfly iQ™ ikke fungerer. Udstyret må kun vedligeholdes som beskrevet i vedligeholdelsesafsnittet.
- Butterfly iQ™ eller dets tilbehør må ikke steriliseres eller autoklaveres.

Biologisk sikkerhed

**ADVARSLER!**

- Brug altid ALARA (As Low As Reasonably Achievable, så lavt som rimelig opnåeligt) -princippet, når du udfører en ultralydsundersøgelse. Yderligere oplysninger om ALARA-princippet findes i AIUM's publikation "Medical Ultrasound Safety" (Sikkerhed ved ultralydsbehandling). Denne publikation er tilgængelig som PDF-link i Butterfly iQ™-appen.
- Hvis Butterfly iQ™ er kontamineret på grund af udsættelse for Creutzfeldt-Jakobs sygdom, er der ikke nogen tilstrækkelig desinfektionsprocedure.
- Brug de rigtige forudindstillinger for den kliniske applikation for den tilknyttede kropsdel, der undersøges. For visse applikationer er der lavere grænser for det akustiske udgangsniveau.
- Der er ingen latexdele i sonden. Nogle former for sondeindkapsling kan imidlertid indeholde naturlig latex, som kan forårsage allergiske reaktioner hos nogle mennesker.
- Hvis du udfører procedurer, der nødvendiggør transduceroverdækning, skal du følge din institutions protokol og/eller de instruktioner, der følger med overdækningen.
- Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder carbon black, som ifølge staten Californien vides at forårsage kræft. Yderligere oplysninger findes på www.P65Warnings.ca.gov.

**FORSIGTIG!**

Undgå kontakt med slimhinder (f.eks. øje, næse, mund) og ikke-intakte hudområder, der er blevet åbnet ved rifter, slid, dermatitis, tynd hud osv.

Operatørens sikkerhed

**ADVARSLER!**

- Brug af beskadiget udstyr eller tilbehør kan medføre, at enheden virker forkert, og/eller øve skade på patienten eller operatøren.
- Undlad at bruge, tilslutte eller betjene Butterfly iQ™ med ikke-godkendt eller ikke-specificeret udstyr eller tilbehør. Det kan medføre, at patienten eller operatøren kommer til skade.
- Brug ikke Butterfly iQ™-applikationen på en mobilenhed, der ikke opfylder mindstekravene. Hvis Butterfly iQ™-applikationen bruges på en mobilenhed, der ikke opfylder mindstekravene, kan det påvirke ydeevnen og billedkvaliteten og eventuelt medfører fejldiagnose.



FORSIGTIGHEDSREGLER!

- For at minimere risikoen for karpaltunnelsyndrom (CTS) og relaterede problemer med bevægeapparatet, er det vigtigt at have en passende kropsholdning, have mulighed for hyppige pauser og undgå at gribe eller holde sonden med for stor kraft.
 - Følg din institutions procedurer for personlige værnemidler (PPE) og infektionskontrolprocedurer (fx øjen-, åndedræts- og håndbeskyttelse), når du betjener, rengør eller desinficerer enheden.
-

Kapitel 3

Systemoversigt

Dette kapitel giver en oversigt over Butterfly iQ™. Det indeholder oplysninger om dets funktioner, de komponenter, der er inkluderet i systemet, krav der skal være opfyldt for at kunne hente, installere og bruge Butterfly iQ™-appen og et overblik over brugergrænsefladen.

Oversigt

Butterfly iQ™ er en håndholdt diagnostisk ultralydsenhed til billeddannelse til generelle formål. Systemet består af tre komponenter:

- Kompatibel Apple® iOS iPhone® eller iPad® (*mobilenheden*)
- Butterfly iQ™-applikationen (appen), hentet og installeret på den kompatible Apple-enhed
- Butterfly iQ™ sonden, der forbindes til mobilenheden for at generere og modtage ultralydssignaler

Bemærk – Mobilenheden er ikke inkluderet i Butterfly iQ™ ultralydssystemet. Du skal købe den separat.

Bemærk – *“Made for iPhone or iPad”* betyder, at det elektroniske tilbehør er designet specifikt til at oprette forbindelse til iPhone eller iPad og er af udvikleren certificeret til at opfylde Apples præstationsnormer. Apple er ikke ansvarlig for driften af denne enhed eller dens overholdelse af sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPhone eller iPad kan påvirke præstationen i trådløs tilstand. iPhone, iPad og Lightning er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

Yderligere oplysninger om komponenterne findes i “Systemkomponenter” på side 3-3. Yderligere oplysninger om kravene til mobilenheden findes i “Krav til mobilenhed” på side 17-1.

En liste over kliniske applikationer findes i “Indikationer” på side 1-2.

Modusser

Butterfly iQ™ leverer M-modus, B-modus og Color Doppler (Farvedoppler) -funktionalitet.

Målinger

Butterfly iQ™ lader dig udføre følgende kliniske målinger:

- M-modus: Afstands-, tids- og pulsmålinger på displayet
- B-modus: Afstands- og ellipsemålinger

Sondetyper

Butterfly iQ™ udgør en enkelt sonde, som er i stand til at udføre alle indikerede kliniske anvendelser.

Beskyttelse af patientdata



FORSIGTIG!

Du skal beskytte patientdata ved at kryptere din mobilenhed med en adgangskode. Du kan ikke bruge Butterfly iQ™-appen, hvis din mobilenhed ikke har en adgangskode aktiveret og konfigureret. Kontakt din IT-/sikkerhedsafdeling for at sørge for, at sikkerhed og patientbeskyttelse sker i overensstemmelse med institutionens politik.

Butterfly anbefaler at fastsætte en automatisk låseperiode i mobilenhedens indstillinger for at forhindre uautoriseret adgang. Yderligere oplysninger findes i din mobilenheds instruktioner for indstillingerne for automatisk låsning.

Det anbefales at bruge en Enterprise Mobile Management (EMM) software på alle enheder, der kan indlæse, gemme og/eller sende elektronisk beskyttede sundhedsoplysninger (ePHI).

Yderligere oplysninger om MDM-software og Butterfly Cloud Enterprise findes i "Butterfly Cloud Enterprise" på side 5-1.

Internetkonnektivitet

Der kræves en internetforbindelse for at hente, installere eller opdatere Butterfly iQ™-appen fra Apple App Store. Der kræves også en internetforbindelse for at logge på og arkivere undersøgelser til Butterfly Cloud. Ellers er der ikke brug for internetforbindelse eller trådløs konnektivitet for at kunne bruge mobilenheden. For at opretholde opdateringer til Butterfly iQ™-appen skal du dog koble på en internetforbindelse hver 30. dag.

Systemkomponenter

Sonden og sondeopladeren er inkluderet i din Butterfly iQ™. Før du starter, skal alle komponenter identificeres, og du skal sikre dig, at din pakke ikke mangler noget.

**ADVARSEL:**

Når du har modtaget Butterfly iQ™, skal du nøje undersøge sonden. Undersøg altid sonden før og efter rengøring, desinfektion eller brug. Undersøg linsens forside, kabel, hus, søm og stik for tegn på beskadigelser såsom revner, spåner, slid eller lækager. For at undgå risikoen for elektrisk fare må du ikke bruge sonden, hvis der er tegn på skade.

Bemærk – Apple iOS-mobilenheden er ikke inkluderet i Butterfly iQ™. Du skal købe den separat.

Butterfly iQ™-app

Butterfly iQ™-appens primære funktion er generel diagnostisk billeddannelse til brug af kvalificeret og uddannet sundhedspersonale, så anatomiske strukturer i menneskekroppen kan visualiseres og måles.

Appen er en gratis download fra Apple App Store. Appen beder dig om at oprette en Butterfly-konto. App- og Butterfly-kontoen skal bruge Butterfly iQ™ personlig ultralyd.


Bemærkninger:

- Hvis din mobilenhed ikke opfylder de krav, der stilles for at hente, installere eller køre Butterfly iQ™-appen, viser iOS en meddelelse. Yderligere oplysninger findes på "Krav til mobilenhed" på side 17-1.
 - Informationssikkerhed: Følg alle din institutions cybersikkerhedspolitikker. Hvis du ikke ved, hvad disse politikker er, skal du kontakte din informationsteknologi (IT) -afdeling. For at bruge Butterfly iQ™-appen skal du angive en adgangskode eller anden benytte en anden sikkerhedsfunktion, så du kan låse skærmen på din mobilenhed. Hvis du ikke har gjort det før og ikke ved hvordan, henvises der til sikkerhedsinstruktionerne for din mobilenhed.
-

Sonde

Butterfly iQ™-sonden er kun beregnet til brug med Butterfly iQ™-appen. Forsøg ikke at tilslutte sonden til andre ultralydssystemer. Figur 3-1 viser delene af sonden og Tabel 3-1 angiver og beskriver delene.

Figur 3-1 Sondekomponenter

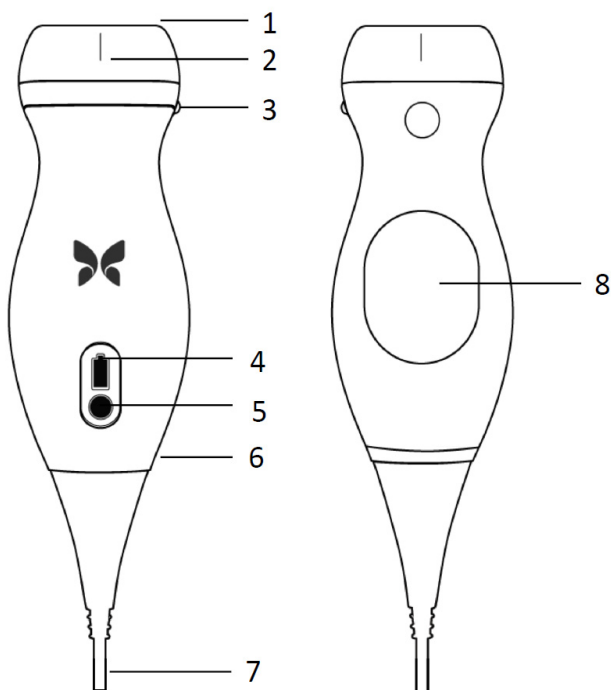

Tabel 3-1 Sondekomponenter

Punkt	Beskrivelse	Punkt	Beskrivelse
1	Linse	5	Batteriindikatorknop
2	Midterlinjemærke	6	Sonde-/kabelgrænse
3	Orienteringsmærke	7	Kabel til mobilenhed
4	Batteriindikatorlamper	8	Opladningsflade

Oplysninger om opretholdelse, rengøring og desinfektion af sonden findes i "Vedligeholdelse af sonden" på side 14-1.

Oplysninger om opladning og opbevaring af sonden findes i "Opladning af sonden" på side 4-6. Oplysninger om batteriindikatorlamper findes i "Kontrol af batteriniveau" på side 4-8.



FORSIGTIG!


Tilslut ikke sonder fra tredjeparter til Butterfly iQ™ mobilenheden, og forsøg ikke at bruge Butterfly iQ™-sonden med andre ultralydssystemer.

Sondens batterioplader

Brug kun den oplader, der følger med sonden.

Figur 3-2 viser batteriets opladningstilbehør og Tabel 3-2 angiver det enkelte tilbehør.

Figur 3-2 Opladningspladens komponenter

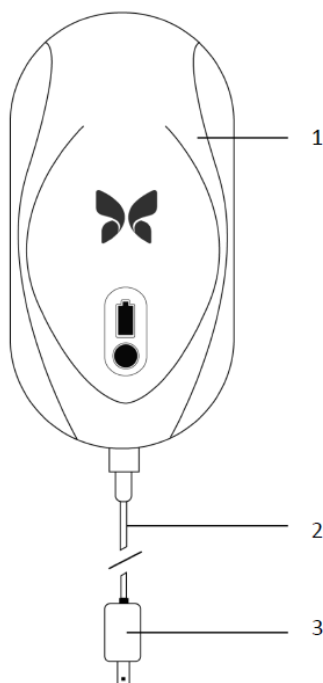

Tabel 3-2 Opladningspladens komponenter

Punkt	Beskrivelse
1	Opladningsplade
2	Opladningskabel
3	Vægadapter


Anvisninger i, hvordan sonden oplades, findes i "Opladning af sonden" på side 4-6. Oplysninger om specifikationer findes i "Sondens batterioplader" på side 17-2.

Oversigt over brugergrænsefladen

Dette afsnit indeholder oplysninger om den billeddannelsesvisning, der præsenteres i Butterfly iQ™-appens brugergrænseflade.

Figur 3-3 viser et eksempel på billedvisningen, og Tabel 3-3 anfører og beskriver elementerne på visningen.

Figur 3-3 Billeddannelsesvisning

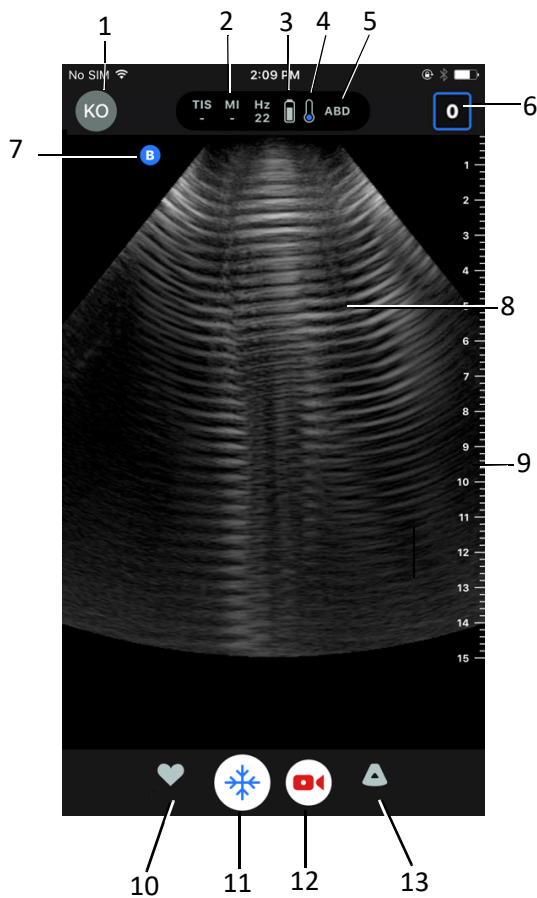

Tabel 3-3 Billedvisningsselementer

Punkt	Beskrivelse
1	User avatar (Brugeravatar). Hvis der er overført et foto, vises fotoet her. Ellers vises brugerens initialer her.
2	Det termiske indeks (TI), mekaniske indeks (MI) og Hz-værdier
3	Sondens batteristatus
4	Sondens temperaturindikator
5	Aktuelle forudindstilling (forkortet)
6	Capture Reel (Optageenhed). Tallet i ikonet angiver antallet af billeder og klip, der i øjeblikket befinder sig i Capture Reel (Optageenhed).
7	Sondens orienteringsmarkør
8	Billedvisningsområde
9	Lineal. Angiver billededybde i centimeter. Når der zoomes ind på billedet, justeres linealen på tilsvarende vis.
10	Presets (Forudindstillinger), valg
11	Freeze (Frys), styrefunktion
12	Record (Optag) klip (video)
13	Modes (Modusser), valg

Forudindstillinger

Forudindstillinger er et foruddefineret sæt parameterværdier for billeddannelse. Når Butterfly iQ™-appen er valgt, fungerer den automatisk i overensstemmelse med det tilsvarende sæt parameterværdier for billeddannelse. Butterfly iQ™-appen inkluderer følgende forudindstillinger:

- Bughulen
- Bughule dyb
- Aorta og galdeblære
- Blære
- Hjerter
- Hjerter, dyb
- FAST (fokuseret vurdering med sonografi for traume)
- Lunge
- Bevægeapparat
- Nerve
- Obstetrisk
- Pædiatrisk bugbunden
- Pædiatrisk hjerter
- Pædiatrisk lunge
- Lille organ
- Blødvæv
- Vaskulær Adgang
- Vaskulær Karotid
- Vaskulær Dyb vene

Bemærk – Flere forudindstillinger indeholder et **Midline (Midterlinje)**-værktøj, som du kan få adgang til ved hjælp af ikonet Værktøjer. Yderligere oplysninger findes på "Gennemgang af rammer fra et frosset billede" på side 6-6.

Oplysninger om konfigurerings af **Preset (Forudindstilling)** findes i "Konfigurerings af forudindstillinger" på side 4-5.

Kapitel 4

Opstilling af systemet

Dette kapitel indeholder oplysninger og instruktioner om hentning og installation af Butterfly iQ™-appen, registrering af sonden, opstilling af Butterfly iQ™ og opladning af sonden til brug.

Hentning og installation af appen

Du kan hente og installere appen Butterfly iQ™ ved at besøge Apple App Store på din iOS-mobilenhed.

Før du henter og installerer appen, skal du sørge for, at din iOS-mobilenhed opfylder eller overskrider de minimale ydelsesspecifikationer. Se "Krav til mobilenhed" på side 17-1 for nærmere oplysninger.

➤ **Sådan hentes og installeres appen:**

1. Åbn Apple App Store på Apple iOS-mobilenheden: 
2. Klik på søgeikonet () og indtast *Butterfly iQ™*.

Bemærk – Hvis du ikke kan installere appen, kan det være et tegn på, at din mobilenhed ikke opfylder de minimale ydelsesspecifikationer. Oplysninger om kravene findes i "Krav til mobilenhed" på side 17-1.

➤ **Sådan begynder du at bruge systemet:**

1. Åbn Butterfly iQ™-appen. Systemet beder dig om at logge på.
2. Indtast din e-mailadresse og adgangskode, og tryk på **Log In (Log på)**.
Skærbilledet **End User License Agreement (Slutbrugerlicensaftale)** vises, så du kan gennemgå og bekræfte den.
3. Brug din finger til at rulle gennem vilkårene og betingelserne, og tryk derefter på **Accept (Accepter)** for at fortsætte.
Systemet beder dig om at aktivere push-meddelelser.
4. Gør en af følgende ting:
 - Giv tilladelse til push-meddelelser ved at trykke på **Enable Push Notifications (Aktiver push-meddelelser)**, og tryk derefter på **Allow (Tillad)**.
 - Afvis push-meddelelser ved at trykke på **Don't notify me (Giv mig ikke besked)**.

Bemærk – DU kan også konfigurere **Notifications (Meddelelser)** i din enheds **Settings (Indstillinger)**.

5. Tilslut Butterfly iQ™ sonden til din mobilenhed.

6. Hvis du bedes om at opdatere firmwaren, skal du læse "Opdatering af firmware" på side 4-2.

Bemærk – Videoerne om at lære at bruge Butterfly iQ™ vises, når du først logger på. Oplysninger om, hvordan du får adgang til videoerne når som helst, findes i "Anvendelse af hjælp" på side 4-5.

7. Begynd at udføre en ultralydsundersøgelse.
8. Når din undersøgelse er færdig, skal du koble Butterfly iQ™-sonden fra din mobilenhed.

Opdatering af firmware

Firmwaren på din mobilenhed skal være opdateret for at kunne udføre billedbehandling.

➤ Hvis du bliver bedt om at opdatere firmwaren, skal du udføre følgende trin:

1. Tryk på **Update (Opdater)**.
2. Når opdateringen er færdig, skal du trykke på **Done (Færdig)** i øverste højre hjørne.

Håndtering af app-opdateringer

Når du er tilsluttet et trådløst netværk eller mobilnetværk, tjekker Butterfly iQ™ automatisk, om der er nogen obligatoriske opdateringer.

Hvis systemet ikke har været forbundet til et trådløst netværk eller mobilnetværk i de sidste 30 dage, beder systemet dig om at oprette forbindelse til internettet for at få vigtige opdateringer.



FORSIGTIG!

Hvis du ignorerer de obligatoriske opdateringer, kan systemet låse dig ude.

Du kan konfigurere Butterfly iQ™-appen til manuelle eller automatiske opdateringer.

Hvis din mobilenhed er konfigureret til automatisk opdatering af apps, opdateres Butterfly iQ™-appen automatisk, når der findes en opdatering.

Hvis din mobilenhed ikke er konfigureret til automatiske opdateringer, skal du regelmæssigt tjekke, om der er opdateringer fra App Store, for at få den seneste opdatering.

Navigering af appen

Dette afsnit indeholder information, der hjælper dig i gang med at navigere appen.

Bemærk – Appen leverer værktøjstips, der fremhæver centrale komponenter i navigation af appen til førstegangsbrugere.

Brug af berøringsskærmen

Appen er designet til at være brugervenlig og bruger de samme berøringsskærmbevægelser til at åbne, lukke, zoome og menuformater som de fleste andre apps. Hvis det er første gang, du bruger mobilenheden, skal du gennemgå den dokumentation og de instruktioner, der fulgte med den. Du kan også besøge Apples support sider for at få grundlæggende instruktioner om brug af berøringsskærmen.

Åbning og lukning af appen

➤ Sådan åbnes appen:

Tryk på app-ikonet på din mobilenheds startskærm: 

➤ Sådan lukkes appen:

Naviger til mobilenhedens startskærm.

Logge på og af appen

Hvis du vil bruge Butterfly iQ™-appen, kan du købe et abonnement online på www.butterflynetwork.com eller anmode om en konto fra din administrator. Når du har fået tildelt en konto, modtager du en invitation til at oprette en adgangskode, som du kan forbinde med din e-mailadresse. Hvis ønsker yderligere information, bedes du kontakte din organisations administrator eller Butterfly Support.

➤ Sådan logger du på:

1. Tryk på **Log In (Log på)**.
2. Indtast dine loginoplysninger på **Log In (Log på)**-skærmen.

➤ Sådan logger du af:

1. Tryk på din brugers avatar (eller dine initialer) i øverste venstre hjørne på billeddannelseskærmen.
2. Tryk på  for at vise skærbilledet **Settings (Indstillinger)**.
3. Tryk på **My Account (Min konto)**.
4. Tryk på **Log Out (Log af)**.

Bemærk – Information om enkeltlogon (Single Sign-On, SSO) og andre funktioner findes i “Butterfly Cloud Enterprise” på side 5-1.

Glemt adgangskode

Bemærk – For at kunne genoprette en glemt adgangskode skal du logge på Butterfly Cloud fra din stationære computer.

➤ **Hvis du glemmer adgangskoden til din konto:**

1. Vælg **Forgot Password (Glemt adgangskode)** på **Log In (Log på)**-skærmen.
2. Følg instruktionerne på skærmen.

Konfigurering af dine systemindstillinger

Alternativt kan du vælge at konfigurere dine systemindstillinger.

Bemærk – Yderligere oplysninger om konfigurering af Butterfly Cloud findes i “Brug af Butterfly Cloud” på side 13-1.

Indstillinger omfatter følgende:

- Brug sektionen **My account (Min konto)** til at få vist flere oplysninger om din konto og for at få adgang til knappen Log Out (Log ud). Yderligere oplysninger om at logge ud findes i “Logge på og af appen” på side 4-3.
- Sektionen **Devices (Enheder)** omfatter den indstilling, der bruges til at konfigurere **My iQ (Min iQ)**:
 - Brug **My iQ (Min iQ)** for at få vist oplysninger, opdatere sondens software og udføre diagnostiske tests for sonden. Se “Opdatering af sonden og app-softwaren” på side 14-4 og “Udførelse af diagnostisk test på sonde” på side 14-5 for nærmere oplysninger.
- Sektionen **Preferences (Præferencer)** omfatter følgende konfigurerbare indstillinger:
 - Brug sektionen **Presets (Forudindstillinger)** til at ændre standardindstillingerne for de valgte forudindstillinger. Indstillingerne er beskrevet i “Konfigurering af forudindstillinger” på side 4-5.
 - Brug indstillingen **Auto-Freeze (Frys automatisk)** til at slå funktionen Auto-Freeze (Frys automatisk) til og fra. Når **Auto-Freeze (Frys automatisk)** er aktiveret, sætter systemet automatisk sonden i en batterisparetilstand, når det er detekteret, at sonden er inaktiv.
 - Brug indstillingen **Upload Studies Over Cellular (Overfør undersøgelser over mobilnetværk)** til at slå evnen til at bruge mobildata til at uploade undersøgelser til og fra.
 - Brug indstillingen **Show Magnifying Glass (Vis forstørrelsesglas)** til at tænde og slukke visningen af det zoomede indhold for at hjælpe med at lægge præcise linjemålinger.

- Brug sektionen **Comment Notifications (Kommentarmeddelelser)** til at slå e-mail og push-meddelelser til og fra, når nogen kommenterer eller nævner dig i en undersøgelse.
- Brug sektionen **Help (Hjælp)** til at få adgang til **Help (Hjælp)**-indstillingerne. Yderligere oplysninger findes på "Anvendelse af hjælp" på side 4-5.
- Brug sektionen **About (Om)** til at se din version af Butterfly iQ™-appen.
- Brug sektionen **Privacy Policy (Fortrolighedspolitik)** til at se Butterfly Network Inc.'s fortrolighedspolitik.
- Brug sektionen **Terms of Use (Brugsbetingelser)** til at se Butterfly Network Inc.'s brugsbetingelser.
- Brug sektionen **End User License Agreement (Slutbrugerlicensaftale)** for at få vist Butterfly Network Inc.'s slutbrugerlicensaftale.

Konfigurering af forudindstillinger

Brug indstillingerne **Presets (Forudindstillinger)** til at konfigurere dine individuelle præferencer for hver forudindstillings billeddannelsesindstillinger til at omfatte: Show in Presets (Vis i menuen forudindstillinger), Thermal Index Display (Termisk indeksvisning), Acoustic Power Setting (Akustisk strømning), Probe Orientation Marker (Sondeorienteringsmarkør), Color Doppler Flow Velocity (Farvedoppler-strømningshastighed) og Trace Scroll Speed (Sporingshastighed).

➤ Sådan konfigureres forudindstillinger:

1. Tryk på din brugers avatar (eller dine initialer) i øverste venstre hjørne på billeddannelseskærmen.
2. Tryk på  for at vise skærbilledet **Settings (Indstillinger)**.
3. I sektionen **Preferences (Forudindstillinger)** skal du trykke på **Presets (Forudindstillinger)**.
4. Tryk på forudindstillingen for at konfigurere den. Den indstilling, der gælder specielt for den valgte forudindstilling, vises. Den aktuelt valgte indstilling vises med blå farve.
5. Tryk på en indstilling for at vælge den.
6. Forudindstillingerne nulstilles til fabriksindstillingen ved at trykke på **Reset (Nulstil)**.

Anvendelse af hjælp

Brug sektionen **Help (Hjælp)** til at få adgang til følgende:

- **Learn Butterfly iQ Basics (Lær grundlæggende funktioner i Butterfly iQ)**
- **Master the Butterfly iQ (Lær at bruge Butterfly iQ)**
- **User Manual (Brugervejledning)**
- **Medical Ultrasound Safety (Sikkerhed ved ultralydsbehandling)**
- **Request Help (Anmod om hjælp)**
- **Submit Feedback (Send feedback)**
- **Report a Bug (Rapporter en fejl)**

➤ **Adgang til hjælp:**

1. Tryk på din brugers avatar (eller dine initialer) i øverste venstre hjørne på billeddannelseskærmen.
2. Tryk på  for at vise skærbilledet **Settings (Indstillinger)**.
3. Rul ned to sektionen **Help (Hjælp)**.

Opladning af sonden

Det er vigtigt at holde din sonde opladet. Oplad din sonde med det leverede batteriopladningstilbehør

Batteriopladningstilbehøret omfatter opladningsplade, opladningskabel og vægadapter. Oplysninger om batteriopladningstilbehør findes i "Sondens batterioplader" på side 3-5.



ADVARSLER!

- Brug kun kabler, sonder, opladere og tilbehør, der angives at være egnede til brug sammen med Butterfly iQ™. Udskiftning med ikke-godkendt tilbehør kan medføre, at systemet virker forkert eller forårsager skade på patienten eller operatøren.
- Hvis sonden virker usædvanlig varm, afgiver lugt eller røg eller lækker, skal du straks indstille brugen. Træk sonden ud af mobilenheden, eller afbryd forbindelsen til den trådløse oplader (hvis relevant). Kontakt support. Se "Opnåelse af support" på side 16-1 for yderligere oplysninger.
- Sonden er designet til at opretholde forseglingen. Forsøg ikke at åbne sonden eller manipulere det indvendige i enheden, herunder batteriet. Det kan medføre, at patienten eller operatøren kommer til skade.
- Sondens batteri kan ikke udskiftes af brugeren. Udskiftning af batteriet af andre parter end Butterfly Support kan være farligt, blandt andet som følge af højere temperaturer, brand eller eksplosion. Information om, hvordan du kontakter support, findes i "Kontakt Butterfly Support" på side 16-1.
- Der skal bruges en ikke-medicinsk strømforsyning uden for patientmiljøet, så den er mindst 1,5 meter fra patienten.




FORSIGTIGHEDSREGLER!

- Sondens batteri skal oplades mindst en gang om måneden for at sikre korrekt funktionalitet.
- Hvis sonden ikke tændes efter opladningen, kan det indikere batterisvigt. Kontakt support. Se "Opnåelse af support" på side 16-1 for yderligere oplysninger.

Figur 4-1 viser en sonde, der oplades. Indikatorlampen for opladeren vises på siden af opladningspladen.

Oplysninger om specifikationer for opladningspladen findes i "Sondens batterioplader" på side 17-2.

Figur 4-1 Opladning af sonden

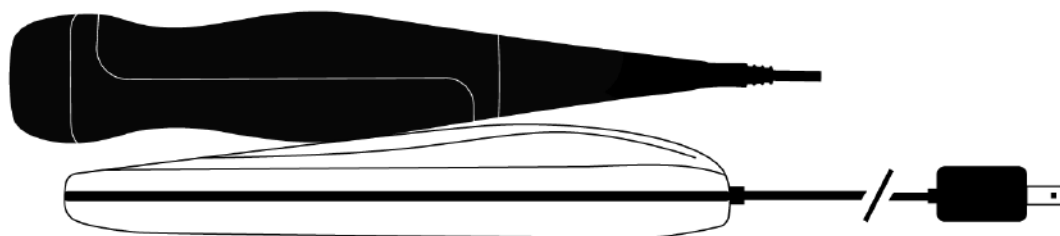

➤ Sådan oplades sonden:

Bemærk – Butterfly iQ™ bruger et trådløst opladningssystem. Forsøg ikke at indsætte din sondes kabel i opladningspladen.

1. Afbryd sondens forbindelse fra mobilenheden.

Bemærk – Du kan ikke udføre billeddannelse, mens sonden lader op.

2. Tilslut opladningskablet til opladningspladen.
3. Tilslut USB-enden af opladningskablet til vægadapteren.
4. Tilslut vægadapteren i stikkontakten.

Bemærk – Hvis den sættes rigtigt i stikkontakten, vil opladeindikatoren blive rød.

5. Sæt sonden på opladningspladen, så sonden ligger fladt på opladningspladen som vist i Figur 4-1. Både opladningspladen og sonden skal placeres, så Butterfly-logoerne vender opad. Sondens opladningsoverflade (se Figur 3-1) skal placeres lige over opladningspladens Butterfly-logo.



FORSIGTIG!

Sørg for at placere sonden på opladningspladen, så den ligger fladt på opladningspladen på en plan overflade. Undlad at hænge opladningspladen op eller lade sonden hænge i opladningspladen.

6. Sørg for, at sonden er korrekt anbragt på opladningspladen, så sondens batterilamper er tændt, og opladerens kontrollampe er blå. Hvis indikatorlampen for opladeren forbliver rød, skal du sætte sonden på opladningspladen igen, indtil opladningsindikatorlampen bliver blå, og indikatorlampen til sondens batteri tændes.

Når sondens batteri oplader, angiver sondens batteriindikatorlamper det aktuelle batteriniveau. Når sonden bliver færdig med at lade op, slukker sondens batteriindikatorlamper, og opladerens kontrollampe bliver rød igen.

Bemærk – Det er normalt, at sonden føles varm ved berøring under opladningen. Hvis du fjerner sonden fra opladningspladen før eller umiddelbart efter, at opladningen er færdig, anbefales det at lade sonden afkøle før brug. Da systemet begrænser

patientens kontakttemperatur og ikke scanner ved eller over 43 °C (109 °F), så sonden kan afkøle før brug, optimerer resultatet under scanningstiden.

Kontrol af batteriniveau

Brug batteriindikatorknappen og batteriindikatorlamperne på sonden til at kontrollere batteriniveauet. Yderligere oplysninger findes i "Sondekomponenter" på side 3-4.

Bemærk – For at sikre, at sonden har nok batteri til at udføre en undersøgelse, skal du forsøge at opretholde et opladningsniveau på over 25 %.

Tabel 4-1 Niveauindikatorer for sondens batteri

Lampemønster	Omtrentligt batteriniveau
All 4 lamper tændt	87,5 % - 100 %
3 lamper tændt	67,5 % - 87,4 %
2 lamper tændt	37,5 % - 67,4 %
1 lampe tændt	12,5 % - 37,4 %
Første lampe blinker	<12 %

➤ **Sådan tjekkes batteriniveauet ved hjælp af sonden:**

1. Tryk på batteriindikatorknappen for at se batteriindikatorlamperne.
2. Hvis den første knap blinker, betyder det, at sondens batteriopladning er for lav til at udføre undersøgelsen.

➤ **Sådan tjekkes batteriniveauet ved hjælp af Butterfly iQ™-appen:**

Sondens batteristatus vises i den øverste del af billedskærmen.



Hvis batteriopladningen er for lav (25 % eller derunder), kan du muligvis ikke gennemføre en undersøgelse, før batteriet er opladet. Hold så vidt muligt batteriet fuldt opladet til hver en tid.

Bemærk – Du kan se det procentvise batteriindikatorniveau ved at tage adgang til skærbilledet **My iQ (Min Iq)**. Se "Konfigurering af dine systemindstillinger" på side 4-4 for nærmere oplysninger.

Kapitel 5

Butterfly Cloud Enterprise

Dette kapitel giver information om Butterfly Cloud Enterprise-funktionen.

Butterfly Cloud Enterprise, funktionalitet

Butterfly Cloud Enterprise-funktionaliteten giver flere funktioner til kunder, der har brug for avanceret sikkerhed, godkendelse og sporing af enheder. Kontakt Support for yderligere oplysninger om opgradering af Enterprise. Se "Kontakt Butterfly Support" på side 16-1 for kontaktoplysninger.

Butterfly-domæner

Butterfly-domæner gør det muligt at opnå bedre kontrol. For et domæne får kunderne et brugerdefineret underdomæne (subdomain.butterflynetwork.com) for at få adgang til deres Butterfly Cloud-organisationer. Alle organisationer på dit domæne har adgang til virksomhedens funktionalitet som enkeltlogon (SSO), brugertilpasset varighed af aflogging, Enterprise Mobile Management (EMM) og flådeadministration.

Enkeltlogon (SSO)

Butterfly Single Sign-On (SSO) gør institutioner i stand til at delegere Butterfly-godkendelse til en eksisterende SAML-kompliant identitetsudbyder, såsom Active Directory. Ved SSO skal brugerne kun huske en enkelt adgangskode, og administratorer kan kræve forbedret identifikation, såsom tofaktorgodkendelse. SSO muliggør også centraliseret kontoadministration til sikker og enkel off-boarding.

Brugertilpasset timeout for inaktivitet

Butterfly brugertilpasset timeout for inaktivitet giver virksomhedsledere fuld kontrol over sessionslængden for sikker brug på delte arbejdsstationer. Med brugertilpasset timeout for inaktivitet kan administratorer konfigurere Butterfly Cloud til at logge ud efter 15 minutter til 10 timers brugeraktivitet.

Enterprise Mobile Management

Butterfly Enterprise Mobile Management (EMM) -funktionen gør administratorer i stand til at forhindre adgang til Butterfly Cloud fra enheder, der ikke er tilmeldt et EMM-program for virksomheder. Administratorer kan om nødvendigt begrænse Butterfly Cloud-adgang til administrerede enheder. Brugere kan logge på for at se Cloud-arkiver og tage nye billeder, når de bruger enheder, der er tilmeldt EMM-program for virksomheder. Når du bruger en personlig enhed eller anden ikke-administreret hardware, blokeres adgangen.

Flådeadministration

Virksomhedsbrugere, der ønsker at holde øje med anvendelse og aktivitet for enheden, kan få adgang til Butterfly iQ™ flådeadministrationsløsningen. Domæneadministratorer kan se oplysninger om alle Butterfly iQ™ personlige ultralydsundersøgelse for et bestemt domæne.

Kapitel 6

Anvendelse af systemet

Dette kapitel indeholder oplysninger og instruktioner om brugen af Butterfly iQ™ til hjælp ved start og afslutning af undersøgelser. Det giver også oplysninger og instruktioner om frysning og frigørelse under levende billedbehandling og til udførelse af målinger.



ADVARSEL:

Det er ikke forsvarligt at begynde at bruge Butterfly iQ™, før du læser denne vejledning i sin helhed.

Bemærkninger:

- Sørg for, at du har læst “Opstilling af systemet” på side 4-1.
 - Hvis Butterfly iQ™-appen er åben, men du ikke aktivt scanner i en periode, går appen i dvaletilstand for at spare på batteriet. Appen vækkes op fra dvaletilstand ved at trykke på dette ikon:
-

Opstart af ny undersøgelse

Når sonden er tilsluttet, kan du begynde en ny undersøgelse.

➤ Sådan startes en ny undersøgelse:

1. Hvis sonden ikke allerede er tilsluttet, skal du tilslutte den.
2. Sonden vil som standard bruge den sidste anvendte forudindstilling.

Bemærk – Tryk på  for at ændre forudindstillingen for undersøgelsen, og tryk om nødvendigt på  for at ændre billedbehandlingsmodussen.

3. Brug godkendt ultralydsgel som transmissionsmedie.

Bemærk – Oplysninger om, hvilken gel der skal anvendes, findes i “Anbefalede ultralydsgeler” på side 17-3.

4. Begynd at bruge sonden til billedtagningen.

Bemærk – Butterfly iQ™-sonden inkluderer et hævet Orienteringsmarkør på siden af sondens hoved. Sondens orienteringsmarkør  vises også på billeddannelsesskærmen. Når der trykkes på sondeorienteringsmarkøren på billedskærmen, skifter orienteringen til den anden side.

Indtastning af patientdata

Bemærk – Denne funktion er kun tilgængelig, når der arkiveres til Butterfly Cloud-destinationen. Yderligere oplysninger findes på “Arkiver” på side 13-7.

Det er ikke nødvendigt at medtage patientdata i undersøgelsen. Du kan dog indtaste patientoplysninger når som helst under undersøgelsen ved at trykke på **Associate a Patient (Tilknyt en patient)**. Afhængig af din konfiguration kan du tilføje patientdata på en af følgende måde:

- **Add Manually (Tilføj manuelt)**
- **Add from Worklist (Tilføj fra arbejdsliste)** (hvis din konto er konfigureret til at bruge en arbejdsliste)

Patientoplysninger inkluderer:

- **Patient Name (Patientnavn)** (Last Name [Efternavn], First Name [Fornavn], Middle Name [Mellempnavn], Title [Titel], og Suffix [Suffix])
- **Sex (Køn)** (Male [Mand], Female [Kvinde], Other [Andet] og Unknown [Ukendt])
- **DOB (Fødselsdato)** (der vises et datorullehjul for at vælge patientens fødselsdato)
- **Accession # (Tilrædelses nr.)**
- **MRN** (patientjournalnummer)

Manuel tilføjelse af patientoplysninger

➤ **Sådan tilføjes patientoplysninger manuelt:**

1. Gå til billeddannelseskærmen og tryk på **Capture Reel (Optageenhed)**, og tryk derefter på **Associate a Patient (Tilknyt en patient)**.
2. Gå til skærbilledet **Patient (Patient)**, brug tastaturet til at indtaste patientoplysningerne og tryk derefter på **Done (Færdig)**.

Tilføjelse af patientoplysninger fra en arbejdsliste

Brug denne indstilling, hvis din konto er konfigureret til at vælge patienten fra en arbejdsliste, der muligvis allerede indeholder deres patientoplysninger. Når du vælger skærbilledet **Patient**, udfyldes den automatisk.

➤ Sådan vælges en patient fra en arbejdsliste:

1. Gå til billeddannelseskærmen og tryk på **Capture Reel (Optageenhed)**, og tryk derefter på **Associate a Patient (Tilknyt en patient)**. Skærbilledet **Patient** vises.
2. Tryk på **Add from Worklist (Tilføj fra arbejdsliste)**.
3. Hvis der er flere arbejdslistes, skal du trykke på den arbejdsliste, der er forbundet med patienten og derpå vælge patienten, eller du kan vælge patienten direkte.
4. Bekræft patientoplysningerne, og tryk på **Save (Gem)**.

Tilføjelse af en undersøgelsesbeskrivelse

Du kan tilføje en beskrivelse af undersøgelsen fra skærbilledet **Study (Undersøgelse)**.

Optagelse og registrering af billeder

Bemærk – Denne funktion er kun tilgængelig, når der arkiveres til Butterfly Cloud-destinationen.

Dette afsnit indeholder oplysninger og instruktioner om brug af forskellige funktioner til at optage og registrere billeder.

Når du tager et billede eller optager et videoklip, gemmes billedet eller klippet automatisk i din **Capture Reel (Optageenhed)**.

Optagelse af billeder

Når du begynder en undersøgelse, kan du straks begynde at bruge sonden til at at scanne billeder.

➤ Sådan tages et billede:

1. Tryk på  for at fryse billedet.
2. Tryk på  for at tage billedet.
3. Tryk på  for at vende tilbage til levende billeddannelse.

Optagelse af et klip

Brug optagelsesfunktionen til at optage og gemme et klip af undersøgelsen. Optagelsen varer som standard 60 sekunder, hvis du ikke manuelt stopper optagelsen.

➤ Sådan optages et klip:

1. Tryk på  for at begynde optagelsen.
2. Når du er færdig med at optage, skal du trykke på  for at afslutte optagelsen.

Brug af optageenheden

Capture Reel (Optagelsespolen) gemmer alle optagne billeder og klip. Du kan se billederne og klippene i undersøgelsen, gemme undersøgelsen i et arkiv og rydde billeder og klip i undersøgelsen.

➤ Sådan anvendes optageenheden:

1. Tryk på **Capture Reel (Optageenhed)**.
2. Gør en af følgende ting:
 - Vis billeder og klip. Du kan stryge til venstre og højre for at se forrige og næste punkt i optageenheden.
 - Gem undersøgelsen i et arkiv. Se "Lagring af en undersøgelse – Overførsel til Butterfly Cloud" på side 6-8 for nærmere oplysninger.
 - Slet alle optagelserne på **Capture Reel (Optageenheden)** ved at trykke på **Clear images (Ryd billeder)**. Systemet beder dig bekræfte sletningen. Når du rydder serien fjernes alle billeder og klip fra **Capture Reel (Optageenheden)**.

Brug af funktioner og værktøjer

Dette afsnit indeholder oplysninger og instruktioner om justering af forstærkning, dybde og TGC ved hjælp af panorering og zoom, frysning og frigørelse af et billede og brug af midterlinjen.

Justering af forstærkning, dybde og TGC

Styrefunktionerne **Gain (Forstærkning)**, **Depth (Dybde)** og **TGC** er tilgængelige under levende billeddannelse.

Styrefunktionen **Gain (Forstærkning)** fås ved at stryge vandret i billedet, hvilket øger eller reducerer forstærkningsprocenten. Når styrefunktionen **Gain (Forstærkning)** aktiveres, aktiveres også **TGC** (Time Gain Compensation, kompensation for tidsforstærkning) for at justere den procentvise fordeling af indstillingerne Near (Nær), Mid (Midt) og Far (Fjern).

Bemærk – I modussen Color Doppler (Farvedoppler) sættes styrefunktionen **Gain (Forstærkning)** til **Color Gain (Farveforstærkning)**. Yderligere information om modussen Color Doppler (Farvedoppler) findes i "Brug af farvedoppler" på side 9-1.

Styrefunktionen **Depth (Dybde)** fås ved at stryge lodret et vilkårligt sted i billedet, hvilket øger eller mindsker dybden i centimeter. Når du øger og mindsker styrefunktionen **Gain (Forstærkning)** eller **Depth (Dybde)**, er kanten af styrefunktionen grøn. Når du vælger værdien, bliver kanten blå.

➤ Sådan justeres forstærkningen:

1. Tryk på et vilkårligt sted på skærmen og køр fingeren lidt til venstre eller højre for at aktivere styrefunktionen **Gain (Forstærkning)**.
2. Når styrefunktionen **Gain (Forstærkning)** er synlig, skal du køр fingeren til højre eller til venstre for at øge eller mindske forstærkningen.

3. Når du er færdig, skal du trykke et vilkårligt sted uden for styrefunktionen **Gain (Forstærkning)** eller blot vente, indtil styrefunktionen ikke længere er aktiv.

➤ **Sådan justeres dybden:**

1. Tryk på et vilkårligt sted på skærmen og køр fingeren lidt op eller ned for at aktivere styrefunktionen **Depth (Dybde)**.
2. Når styrefunktionen **Depth (Dybde)** er synlig, skal du køр fingeren op eller ned for at øge eller mindske dybden.
3. Når du er færdig, skal du trykke et vilkårligt sted uden for styrefunktionen **Depth (Dybde)** eller blot vente, indtil styrefunktionen ikke længere er aktiv.

➤ **Sådan justeres TGC på et billede:**

1. Tryk på et vilkårligt sted på skærmen og køр fingeren lidt til venstre eller højre for at aktivere styrefunktionen **Gain (Forstærkning)**. Når styrefunktionen **Gain (Forstærkning)** er aktiv, vises styrefunktionen **TGC**  nederst på skærmen.
2. Brug glideknapperne **Near (Nær)**, **Mid (Midt)** og **Far (Fjern)** for at justere billedet efter behov ved at trykke på en skyder og bevæge fingeren til højre eller venstre for at øge eller reducere procentdelen.
3. Tryk om nødvendigt på **Reset (Nulstil)** for at nulstille skyderne **Near (Nær)**, **Mid (Midt)** og **Far (Fjern)** til 50 % (fabriksindstillingen).
4. Tryk på **Done (Færdig)**, når du er færdig.

Brug af Pan (Panorering) og Zoom

Funktionerne Pan (Panorering) og Zoom på appen bruger den samme funktionalitet som enhver iOS-applikation.

Bemærk – Du kan bruge bevægelserne klemme og dobbelttryk for at zoome ind og ud på et billede. Når billedet er i en zoomet tilstand, kan du bruge din finger til at panorere på billedet (flyt det rundt på skærmen).

Når du zoomer, vises et miniaturebillede af billedet i den øverste højre del af skærmen med en gul grænselinje, som angiver regionen af interesse (region of interest, ROI). Når du panorerer på det zoomede billede, opdateres ROI'en for at orientere dig hen mod det zoomede billede.

➤ **Sådan zoomes der ind på et billede:**

1. Sæt to fingre på skærmen og spred dem for at zoome ind eller dobbeltklik på billedet. ROI'en vises.
2. Fortsæt med at bruge klemmen til at zoome, eller lav dobbelttrykbevægelser for at zoome ind og ud på billedet.

➤ **Sådan panoreres der på et zoomet billede:**

1. Tryk på et vilkårligt sted på billedet, og bevæg fingeren til venstre, højre, op og ned for at placere billedet på skærmen.

➤ **Sådan zoomes der ud fra et billede:**

1. Sæt to fingre på skærmen og spred dem for at zoome ud eller dobbeltklik på det zoomede billede.

2. Fortsæt med at bruge klemmen til at zoome, eller lav dobbelttrykbevægelser for at zoome ind og ud på billedet.

Frysning og frigørelse af et billede

Du kan til enhver tid fryse det levende billede for at optage de nuværende eller nylige rammer som billeder.

➤ Sådan fryses og frigøres et billede under scanning:

1. Tryk på  for at fryse billedet.
2. Billedet frigøres, og scanningen genoptages ved at trykke på .

Du kan også:

- Tryk på  for at tage billedet og gemme det på **Capture Reel (Nærtageenheden)**. Yderligere oplysninger om, hvordan der tages billeder, findes i "Optagelse af billeder" på side 6-3. Oplysninger om **Capture Reel (Optageenhed)** findes i "Brug af optageenheden" på side 6-4.
- Udfør linje- og ellipsemålinger. Se "Udførelse af en lineær måling" på side 7-1 for nærmere oplysninger.

Gennemgang af rammer fra et frosset billede

Når billedet er frosset, skal du trykke på  for at få vist rammer fra op til de sidste ti sekunder af levende billeddannelse. Du kan vælge en individuel ramme eller optage en cine, som er et klip af rammeserien.

Du vælger et billede fra serien af de seneste billeder ved at trykke på **Select (Vælg)**, når den frosne ramme er optegnet. Når billedet er frosset, kan du også udføre følgende:

- Tryk på  for at tage billedet og gemme det på **Capture Reel (Optageenheden)**. Yderligere oplysninger om, hvordan der tages billeder, findes i "Optagelse af billeder" på side 6-3. Oplysninger om **Capture Reel (Optageenhed)** findes i "Brug af optageenheden" på side 6-4.
- Udfør linje- og ellipsemålinger. Se "Udførelse af en lineær måling" på side 7-1 for nærmere oplysninger.

En cine optages ved at trykke på **Capture Cine (Optag cine)**. Cinen optages automatisk på **Capture Reel (Optageenhed)**.

Brug af midterlinjen

Værktøjet **Midline (Midterlinje)** lader dig tænde for midterlinjemærket for at markere sondens centrum under interventionsprocedurer.

Følgende forudindstillinger inkluderer værktøjet **Midline (Midterlinje)**, når du er i M-modus eller Color Doppler (Farvedoppler) -modus:

- Bevægeapparat
- Nerve
- Blødvæv
- Vaskulær Adgang
- Vaskulær Karotid
- Vaskulær Dyb vene

➤ Sådan opnås der adgang til værktøjet Midline (Midterlinje) fra forudindstillingen:

1. Tryk på eller stryg ikonet Tools (Værktøjer) , som befinder sig i nederste højre hjørne.
2. Tryk på  for at tænde for midterlinjemarkørerne.
3. Tryk på  for at slukke for midterlinjemarkørerne.

Lagring af en undersøgelse – Overførsel til Butterfly Cloud

Bemærk – Denne funktion er kun tilgængelig, når der overføres til Butterfly Cloud.

Når du overfører en undersøgelse, har du mulighed for at slette billederne fra **Capture Reel (Optageenheden)** og automatisk sætte sig i en ny undersøgelsestilstand.

➤ **Sådan arkiveres en undersøgelse:**

1. Når du er færdig med at tage ultralydsbilleder, skal du trykke på **Capture Reel (Optageenheden)** i øverste højre hjørne af skærmen. Skærm billedet **Study (Undersøgelse)** vises.
2. Tryk på **Save (Gem)** for at starte en overførsel. Yderligere oplysninger om, hvordan en undersøgelse overføres, og de forskellige måder, der kan gemmes på, findes i "Butterfly Cloud" på side 12-1.
3. Slet alle optagelserne på **Capture Reel (Optageenheden)** ved at trykke på **Clear images (Ryd billeder)**. Systemet beder dig bekræfte sletningen. Når du rydder serien fjernes alle billeder og klip fra **Capture Reel (Optageenheden)**.

Kapitel 7

Anmærkninger

Dette kapitel indeholder oplysninger om og instruktioner i udførelse af bemærkninger på billeder i Butterfly-appen. Bemærkninger kan omfatte lineære målinger, ellipse målinger og tekstanmærkninger.

Tilføjelse af bemærkninger

Du kan tilføje bemærkninger på alle frosne billeder

Bemærkninger tilføjes under direkte billeddannelse ved at trykke på  for først at fryse billedet for at vise bemærkningsværktøjerne. Bemærkningsværktøjerne vises under billedområdet.

Udførelse af en lineær måling

Du kan udføre op til fire lineære målinger på hvert billede.

➤ **Sådan udføres en lineær måling:**

1. Tryk på  for at fryse billedet.
2. Tryk på  for at få adgang til måleværktøjerne.
3. En lineær måling udføres ved at trykke på  og vælge den lineære måling.
4. Tryk på den blå cirkel  og brug den til at trække de gule krydsmarkører til start- eller slutpositionen. Når du manipulerer linjens ender, vises længden (i centimeter) i en boks nederst på billedet. Du kan trække denne boks til det ønskede sted på billedet.

Bemærk – Resultatet er afstanden mellem de gule krydsmarkører.

5. Tilføj en anden linje ved at trykke på . Den næste linje vises i en anden farve med pincet i begge ender. Gentag ovenstående trin for at manipulere linjens ender.
6. Hvis du vil redigere en linje, skal du trykke på linjen eller trykke på linjens mål og justere linjen efter behov.
7. En linje slettes ved at trykke på linjen eller trykke på linjens måling. Tryk på **X** ved siden af det tilsvarende numeriske måledisplay, og derpå trykke på **Delete Line (Slet linje)** for at bekræfte.

Udførelse af en ellipsemåling

Du kan udføre en ellipsemåling på hvert billede. Ellipsen vises på billedet med to kalibrer. Når du manipulerer ellipsen, vises omkredsen og området i cm og cm² nederst på billedet.

➤ Sådan udføres en ellipsemåling:

1. Tryk på  for at fryse billedet.
2. Tryk på  for at få adgang til måleværktøjerne.
3. Vis ellipseværktøjet ved at trykke på . Ellipsen vises med to kalibrer.
4. Tryk på og træk i caliperikonerne på skalaen, og drej ellipsen. En boks med ellipsens omkreds og område (vist i cm og cm²) vises nederst på siden. Du kan trække denne boks til det ønskede sted på billedet.
5. Bevæg ellipsen ved at røre hvor som helst på ellipsen og trække den til den ønskede position.
6. En ellipse slettes ved at trykke på ellipsen for at vælge den og derpå trykke på **X** ved siden af det tilsvarende numeriske måledisplay. Tryk på **Delete Ellipse (Slet ellipse)** for at bekræfte.

Tilføjelse af tekstanmærkning

Du kan tilføje op til fem tekstanmærkninger på hvert billede. Du kan vælge en foreslået anmærkning, der afhænger af forudindstillingen, eller indtaste din egen anmærkning. Når du tilføjer anmærkningen, kan du derpå bevæge den til det ønskede sted på billedet.

➤ Sådan tilføjes en anmærkning:

1. Tryk på  for at fryse billedet.
2. Tryk på  for at vise måleværktøjerne.
3. Tryk på  for at vise skærbilledet **Search or Create New Annotation (Søg eller opret ny anmærkning)**.
4. Tryk på anmærkningen for at bruge en forudkonfigureret anmærkning.
5. Du kan indtaste din egen anmærkning ved hjælp af tastaturet.
6. Tryk på **Done (Færdig)**.
7. Træk anmærkningen til det ønskede sted på billedet.
8. Slet en anmærkning ved at trykke på den og derpå vælge dens **X**. Tryk på **Delete Annotation (Slet anmærkning)** for at bekræfte.

Kapitel 8

Automatisk estimering af ejektionsfraktioner

Dette kapitel indeholder oplysninger og instruktioner til automatisk estimering af venstre ventrikulære ejektionsfraktioner (EF).

Oversigt over automatiske ejektionsfraktioner

Det **automatiske EF-værktøj** er tilgængeligt for kardielle visninger af apikal 4-kammeret (A4C). Butterfly iQ™ bruger Simpsons monoplanmetode¹ til at beregne EF.

Beregning af automatisk ejektionsfraktion på en ny undersøgelse

Det **automatiske EF-værktøj** giver dig mulighed for at estimere EF'er ved registreringsopgaver i hjerteundersøgelser. Du kan beregne automatiske EF'er fra en visning af apikal 4-kammeret (Simpsons EF).

Den kardielle forudindstilling inkluderer det **automatiske EF-værktøj**, når du er i B-modus, M-modus eller farvedoppler-modus.

➤ **Sådan opnås der adgang til det automatiske EF-værktøj fra forudindstillingen:**

1. Tryk på eller stryg ikonet **Tools** (Værktøjer) , som befinder sig i nederste højre hjørne.
2. Du har mulighed for at vælge **Simpsons EF**.
3. Tryk på **Exit** (Afslut) for at slå EF-værktøjerne fra.

➤ **Sådan beregnes Simpsons EF:**

1. Vælg **Simpson's EF** i værktøjslinjen.

Skærmen **Record an Apical 4 Chamber** (Registrer et apikal 4-kammer) vises med en kvalitetsindikator  nederst på skærmen.

Noter

- Kvalitetsindikatoren bruger en skala, der går fra rød til grøn, hvor grøn angiver et højtkvalitetsbillede.
- Hjælp til at bruge det automatiske EF-værktøj, herunder oplysninger om korrekt sondeplacering, fås ved at trykke på .


2. Vælg **Calculate EF** . Der registreres automatisk et 3-sekunders klip.

¹ Lang et al., J. Am. Soc. Echocardiography, 2005: 1440-63. Estimerer af basispunkterne for mitralventilens "punkter" bruges til at definere mitralventilens midtpunkt og spidspunktet (det punkt, der er længst ude på segmenteringsmasken fra midtpunktet). Disse to punkter danner en akse, som vi udfører diskusintegration omkring. Konventionen er, at der skal bruges 20 diske.

Bemærk – Hvis billedet ikke opfylder kvalitetstærsklen, vises meddelelsen **Insufficient Quality** (Utilstrækkelig kvalitet). Prøv at tage et nyt billede i bedre kvalitet.

3. Efter en vellykket beregning af Simpsons EF vises en ejektionsfraktion nederst på skærmen. Målepositionerne er angivet med en blå kontur som vist i Figur 8-1.

Figur 8-1 Målepositioner på Simpsons EF-beregning

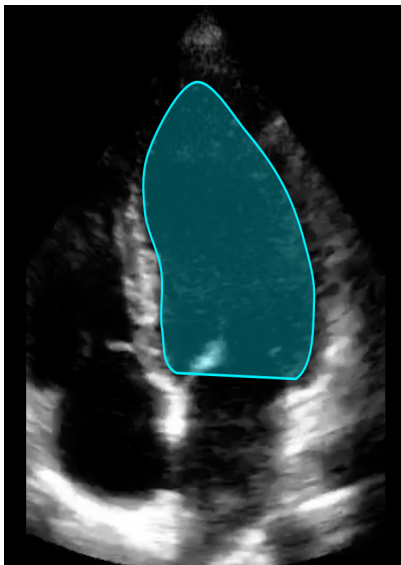


Redigering af en automatisk estimeret ejektionsfraktion

Det **automatiske EF-værktøj** giver dig mulighed for at redigere den estimerede ejektionsfraktion.

➤ **Sådan redigeres en estimeret ejektionsfraktionsmåling af A4C-visningen:**

1. Vælg **Edit** (Rediger) i det hvide felt i resultatvinduet Ejection Fraction (Ejektionsfraktion). Skærbilledet **Edit** (Rediger) vises som set i Figur 8-2 med følgende:
 - En ramme fra den optagne 3 sekunders optagelse vises i midten af skærmen, og en bladserie for hver ramme i optagelsen vises langs bunden af skærmen.
 - En farvet boks (som vist i den nederste del af skærmen i Figur 8-2) angiver, hvilken ramme i optagelsen der i øjeblikket er valgt i den større visning.
 - De slutdiastole (ED) og slutsystole (ES) rammer, som værktøjet valgte, fremhæves i serien med den relevante forkortelse.
 - Konturen, der angiver den venstre ventrikel, som anvendes til at beregne ejektionsfraktionen via Simpsons monoplanmetode, vises på hovedbilledet for hver ramme i hjertecyklussen, som det automatiske ejektionsfraktionsværktøj anvender.

Figur 8-2 Redigering af estimeret ejektionsfraktion af A4C-visningen

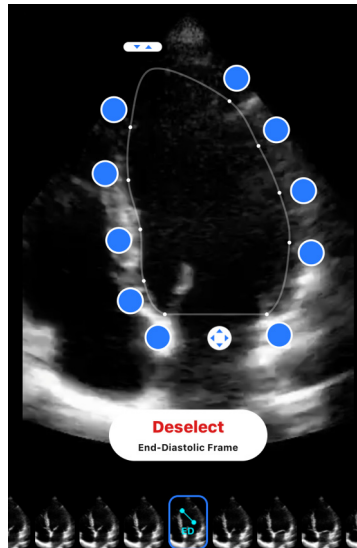

2. For at ændre hvilken ramme, der bruges til ED, skal du først sikre dig, at den af værktøjet identificerede ramme er valgt. Når den er valgt, vises knappen **Deselect** (Fravælg) som vist i Figur 8-2.
3. Tryk på knappen **Deselect End-Diastolic Frame** (Fravælg slutdiastolisk ramme) for at fjerne ED-indikationen fra rammen. Rul for at fremhæve den nye ramme, der skal markeres som ED. Når den ønskede ramme er fremhævet, skal du trykke på knappen **Select End-Diastolic Frame** (Vælg slutdiastolisk ramme).

Bemærk – Brug den samme process til at vælge ES-rammen. ED-rammen skal vælges før ES-rammen i sekvensen på skærmen. Overvej at ændre både ED og ES, hvis en af dem redigeres.

4. For at flytte den samlede position for den kontur, der bruges til at måle den ventrikulære overflade, skal du trykke på og trække i det hvide ankerpunkt . Slip ankerpunktet, når konturen er i den rigtige position.
5. Placeringen af de kontursider, der bruges til at måle den ventrikulære overflade, ændres ved at trykke på og trække i den blå cirkel, der angiver justeringspunkter omkring konturen . Slip justeringspunktet, når konturen er i den rigtige position.
6. Konturens spidsposition ændres ved at trykke på og trække i spidsjusteringslinjen  øverst på konturen. Slip spidsjusteringslinjen, når konturen er i den rigtige position.
7. Når redigeringen er færdig, skal du trykke på **Done** (Færdig) i øverste højre hjørne af skærmen.
Resultatskærmen for den automatiske ejektionsfraktion vises, og den beregnede ejektionsfraktion markeres som en Manuel måling med Simpsons metode.
8. For at vende tilbage til den automatiske måling efter at have foretaget en manuel rettelse skal du trykke på **Reset (Nulstil)**.

Sådan gemmes en automatisk estimeret ejektionsfraktion

Det **automatiske EF-værktøj** giver dig mulighed for at gemme det estimerede ejektionsfraktionsresultat med henblik på gennemgang ved hjælp af Butterfly iQ™ appen og Butterfly Cloud.

➤ **Sådan gemmes en estimeret ejektionsfraktionsmåling af A4C-visningen:**

1. Vælg **Save** (Gem) fra øverste højre hjørne af skærmen med ejektionsfraktionsresultatet.

Det registrerede 3-sekunders optagelses-loop med den estimerede ejektionsfraktion og tilhørende ED- og ES-konturer for venstre ventrikel gemmes i **Capture Reel** (Optageenheden).

Bemærk – Når du vælger **Delete** (Slet), slettes både ejektionsfraktionsresultatet og den 3-sekunders optagelse, der bruges til at beregne resultatet. Hvis en ejektionsfraktion ikke kan estimeres på grund af utilstrækkelig optagekvalitet, gemmes den ikke-annoterede 3-sekunders optagelse i **Capture Reel** (Optageenheden).

Kapitel 9

Brug af farvedoppler

Dette kapitel indeholder oplysninger og instruktioner om brug af farvedoppler, når der foretages et ultralydsundersøgelse.

Oversigt over farvedoppler

Brug farvedoppler til at visualisere blodgennemstrømningen (gennemsnitshastighed og retning) overlejret på et B-modus billede.

I farvedoppler vises en farveregion af interesse (ROI) på billedskærmen for at repræsentere gennemsnitshastigheden og strømningsretningen. Farveskalaen vises til højre for billedet.

Når du bruger farvedoppler, kan du:

- Juster størrelsen og placeringen af ROI
- Juster forstærkning og dybde. Yderligere instruktioner findes i "Justering af forstærkning, dybde og TGC" på side 6-4.
- Juster skalaen (også betegnet Pulse Repetition Frequency (PRF)) for at optimere for høj eller lav flow ved at trykke på styrefunktionen **High/Low (Høj/Lav)** nederst på skærmen

Adgang til farvedopplermodus

➤ **Sådan skiftes der til farvedopplermodus:**

Tryk på ikonet for modusser  og vælg **Color Doppler (Farvedoppler)**.

Justering af regionen af interesse (ROI)

ROI vises på billedet. Når du flytter ROI, vil kanten være blå, indtil destinationen nås.

➤ **Sådan justeres ROI:**

1. Hvis du vil ændre ROI, skal du trykke på ikonet  og trække fingeren op, ned, til venstre eller højre for at justere størrelsen og retningen af ROI.

Bemærk – Når formatet er lineært (såsom vaskulær), skal du bruge  til at justere bredden.

2. ROI flyttes ved at trykke i ROI og trække ROI til den nye position.

Tip – Du kan zoome ind på ROI. Når du justerer zoomet, vises et miniaturebillede af billedet i den øverste højre del af skærmen med en gul ROI-ramme. Når du panorerer på det zoomede billede, opdateres ROI'en for at orientere dig hen mod det zoomede billede.

Justering af forstærkning, dybde og PRF

Styrefunktionerne **Color Gain (Farveforstærkning)**, **Depth (Dybde)** er tilgængelige under farvedoppler-billeddannelse.

Styrefunktionen **Color Gain (Farveforstærkning)** øger eller mindsker forstærkningsandelen. Styrefunktionen **Depth (Dybde)** øger eller mindsker dybden i centimeter. Du kan finde styrefunktionerne **Color Gain (Farveforstærkning)** og **Depth (Dybde)** ved at røre hvor som helst uden for ROI.

Se "Justering af forstærkning, dybde og TGC" på side 6-4 for yderligere oplysninger om justering af forstærkning og dybde.

Farvestrømsstanden justeres ved at vælge **Low (Lav)** eller **High (Høj)**.

Kapitel 10

Brug af Power Doppler

Dette kapitel indeholder oplysninger og instruktioner om brug af Power Doppler, når der foretages et ultralydsundersøgelse.

Oversigt over Power Doppler

Brug Power Doppler til at visualisere blodgennemstrømningens energi (ikke hastighed eller retning) overlejret på et B-modus billede.

I Power Doppler vises energien af den strøm, som er indeholdt i regionen af interesse (ROI), med et intensitetskort med et rødt skær. Dette farvekort vises til højre for billedet.

Når du bruger Power Doppler, kan du:

- Juster størrelsen og placeringen af ROI
- Juster farveforstærkning og -dybde
- Juster hastighedsskalaen for at optimere for høje eller lave strømningshastigheder

Anvendelse af Power Doppler-modus

➤ **Sådan skiftes der til Power Doppler-modus:**

Tryk på ikonet for modusser  og vælg **Power Doppler**.

Justering af regionen af interesse (ROI)

ROI vises på billedet. Når du flytter ROI, vil kanten være blå, indtil destinationen nås.

➤ **Sådan justeres ROI:**

1. Hvis du vil ændre ROI, skal du trykke på ikonet  og trække fingeren op, ned, til venstre eller højre for at justere størrelsen og retningen af ROI.

Bemærk – Når formatet er lineært (såsom vaskulær), skal du bruge  til at justere bredden.

2. ROI flyttes ved at trykke i ROI og trække ROI til den nye position.

Tip – Du kan zoome ind på ROI. Når du justerer zoomet, vises et miniaturebillede af billedet i den øverste højre del af skærmen med en gul ROI-ramme. Når du panorerer på det zoomede billede, opdateres ROI'en for at orientere dig hen mod det zoomede billede.

Justering af farveforstærkning, -dybde og hastighedsskala

Styrefunktionerne **Color Gain (Farveforstærkning)**, **Depth (Dybde)** er tilgængelige under Power Doppler-billeddannelse.

Styrefunktionen **Color Gain (Farveforstærkning)** øger eller formindsker kun forstærkningsprocenten for Power Doppler-output (ikke B-modus-output). Styrefunktionen **Depth (dybde)** øger eller mindsker dybden af B-modus og Power Doppler-output i centimeter. Du kan finde styrefunktionerne **Color Gain (Farveforstærkning)** og **Depth (Dybde)** ved at røre hvor som helst uden for ROI og trække vandret eller lodret.

Se "Justering af forstærkning, dybde og TGC" på side 6-4 for yderligere oplysninger om justering af forstærkning og dybde.

Du kan justere hastighedsskalaen for høje og lave hastigheder ved hjælp af styrefunktionerne **High (høj)** og **Low (lav)** nederst på skærmen. Ved at vælge **Low (lav)** kan du øge følsomheden over for lavere hastighedsstrømme.

Kapitel 11

Brug af M-modus visning

Dette kapitel indeholder oplysninger og instruktioner om brug af M-modus visningen, når der foretages en ultralydsundersøgelse.

Oversigt over M-modus visning

Billeddannelse med M-modus visning giver høj temporal opløsning af vævets bevægelse.

M-modus visningen indbefatter hastighedsregulatorer (Fast [Hurtig] eller Slow [Langsom]), M-modus linje, B-modus billede og et bevægelsespunkt for at bevæge M-modus linjen.

Adgang til M-modus

➤ **Sådan skiftes der til M-modus:**

Tryk på ikonet Modusser  og vælg **M-mode (M-modus)**.

Brug af M-modus

Når du bruger M-modus, kan du:

- Juster den radiale scannelinje ved at trykke på og trække i bevægelsespunkt: 
- Juster sweep-hastigheden i M-modus visningen ved at berøre styrefunktionen **Fast (Hurtig)/Slow (Langsom)** midt på skærmen
- Juster **Depth (Dybde)** og **Gain (Forstærkning)**
- Udfør tids-, afstands- og pulsmålinger på displayet

➤ **Sådan anvendes M-modus:**

Scannelinjens vinkel justeres ved at trykke på bevægelsespunkt  og trække den radialet.

Justering af Sweep Speed (Sweep-hastighed), Gain (Forstærkning) og Depth (Dybde)

Styrefunktionerne **Gain (Forstærkning)**, **Depth (Dybde)** og **Sweep Speed (Sweep-hastighed)** er tilgængelige under billeddannelse i M-modus.

Styrefunktionen **Gain (Forstærkning)**, der fås ved at stryge vandret i billedet, øger eller reducerer forstærkningsprocenten. Styrefunktionen **Depth (Dybde)**, der fås ved at stryge lodret i billedet, øger eller mindsker dybden i centimeter. Brug styrefunktionen **Sweep Speed (Sweep-hastighed)** til at justere sweep-hastigheden (**Fast [Hurtig]** eller **Slow [Langsom]**).

Se "Justering af forstærkning, dybde og TGC" på side 6-4 for yderligere oplysninger om justering af forstærkning og dybde.

➤ Sådan justeres sweep-hastigheden i scannelinjevisningen:

Tryk på **Slow (Langsom)** eller **Fast (Hurtig)** for at ændre sweep-hastighed.

Udførelse af M-modus-målinger

Når du udfører en måling i M-modus, beregner Appen tid, puls (bpm) og afstand ud fra linjens placering.

➤ Sådan udføres en måling:

1. Tryk på  for at fryse billedet.
2. Tryk på  for at få adgang til måleværktøjerne.
3. En afstandsmåling foretages ved at trykke på .
4. Brug  til at placere krydsmarkørerne.
5. Linjen slettes ved at trykke på **X** ved siden af det tilsvarende numeriske måledisplay, og derpå trykke på **Delete Line (Slet linje)** for at bekræfte.

Kapitel 12

Overførsel af en undersøgelse

Dette kapitel indeholder oplysninger og instruktioner om overførsel af en undersøgelse, hentning af en overført undersøgelse og konfigurerings af overførselsdestinationsarkiver.

Oversigt

En undersøgelse omfatter patientinformation, undersøgelsesbeskrivelse og optagelserne (billeder og/eller klip). Når du overfører en undersøgelse, har du mulighed for at vælge de billeder, som du ønsker at inkludere i arkivet. Du kan også vælge at slette de optagelser, der ikke er inkluderet i arkivet, eller lægge dem ind i en ny undersøgelse.

Butterfly Cloud

Butterfly Cloud er en webbaseret applikation, der giver brugerne mulighed for at overføre ultralydsundersøgelser fra Butterfly iQ™ iOS-appen. Yderligere oplysninger findes på "Brug af Butterfly Cloud" på side 13-1.

Overførsel af en undersøgelse

➤ Sådan overføres en undersøgelse:

1. Når du har taget alle de billeder, du vil overføre, skal du trykke på **Capture Reel (Optageenhed)**.
2. Tryk på **Save (Gem)**. Hvis du endnu ikke har tilknyttet en patient til undersøgelsen eller tilføjet en undersøgelsesbeskrivelse, beder systemet dig om at fortsætte uden at tilføje undersøgelsesoplysninger. Se "Indtastning af patientdata" på side 6-2 for nærmere oplysninger.
3. Vælg Butterfly Archive-destinationen.
4. Alle billeder vælges for at gemme som standard. Et billede fravælges ved at trykke på billedet.
5. Hvis du fravalgte et billede eller billeder, vil systemet, når du trykker på **Confirm (Bekræft)**, i øverste højre hjørne bede dig om at kassere billederne eller overføre dem til en ny undersøgelse. Overførte billeder forbliver i **Capture Reel (Optageenhed)**.
6. Tryk på **Confirm (Bekræft)**. Billedannelsesskærmen vises. En statusindikator vises rundt omkring din avatar i øverste venstre hjørne af skærmen. Når den først er uploadet, vises et afkrydsningsfelt for at bekræfte, at undersøgelsen er overført til det valgte arkiv.

Visning af overførselsstatus

Når du overfører undersøgelser til flere arkivdestinationer, viser systemet en statusmeddelelse nederst på skærbilledet **My Account (Min konto)**.

➤ Sådan vises overførselsstatus:

1. Tryk på din brugeravatar (eller dine initialer) for at få vist din arkivskærm, hvor du kan se et arkivfeed af alle dine overførsler.
2. Tryk på notifikationen nederst på skærmen. Skærbilledet **Outbox (Udbakke)** vises med de overførsler, der venter, er i gang eller slog fejl.
3. Du kan se overførselsstatus og om nødvendigt annullere overførslen.
4. For svigtede overførsler kan du trykke på **Retry (Prøv igen)** eller trykke på **X** for at annullere overførslen.

Visning af en overført undersøgelse

Når en undersøgelse er blevet overført, kan du gå til overførselsdestinationen for at hente undersøgelsen.

Undersøgelser er organiseret på arkivskærmen med den seneste undersøgelse angivet først.

Brug  til at søge efter en bestemt undersøgelse. Der vises et tastatur, hvor du kan indtaste tekst for hjælpe dig med at finde undersøgelsen.

Du har mulighed for at dele et link af undersøgelsen eller billedet/billederne fra undersøgelsen. Linket kopieres til din mobilens udklipsholder, hvor du kan dele det med andre.

Bemærk – Når du deler en link, er patientoplysningerne IKKE inkluderet. Undersøgelsen afidentificeres for at beskytte patientens identitet.

➤ Sådan vises en overført undersøgelse:

1. Tryk på din brugers avatar (eller dine initialer) i øverste venstre hjørne. Arkivskærmen vises.
2. Klik på rullemenuen for at se en liste over alle tilgængelige arkiver. Arkiverne er angivet i alfabetisk rækkefølge.
3. Vælg det arkiv, der indeholder den undersøgelse, som du ønsker at hente.
4. Rul gennem listen over undersøgelser, og tryk på undersøgelsen til at vise nærmere detaljer.

Bemærk – Listen over undersøgelser opdateres ved at stryge nedefter.

5. Tryk på miniaturebilledet eller -klippet for at se det i fuldskræmsmodus.
6. I fuldskræmsmodus kan du stryge til venstre og højre for at se det forrige og næste billede eller klip.
7. Du kan dele et link til undersøgelsen eller billedet ved at trykke på  i øverste højre hjørne af skærmen.
8. Tryk på **Share De-identified Study Link (Del afidentificeret undersøgelseslink)**, og indsæt derefter linket i det program, du bruger til at dele information (f.eks. e-mail, sms, osv.).
9. Brug **X** øverst til venstre på billederne og pilen øverst til venstre på undersøgelsessiderne for at vende tilbage til arkivskærmen.
10. Du vender tilbage til levende billeddannelse fra arkivskærmen ved at trykke på **Scan (Scanne)**.

Tilføjelse og visning af kommentarer på billeder

Du kan tilføje og vise kommentarer på overførte billeder. Hvis der er tændt for meddelelser, og du bruger en teamkonto, modtager brugerne en meddelelse, hver gang der tilføjes en kommentar til det billede, de har overført eller der nævnes en bruger i billedet. Yderligere oplysninger om aktivering af meddelelser findes i "Konfigurering af dine systemindstillinger" på side 4-4.

➤ Sådan tilføjes eller vises kommentarer

1. Tryk på din avatar for at få adgang til arkivskærmen. Arkivdestinationerne er angivet i alfabetisk rækkefølge.
2. Vælg det arkiv, der indeholder den undersøgelse, som du ønsker at hente.
3. Rul gennem listen over undersøgelser, og tryk på undersøgelsen til at vise nærmere detaljer.
4. Tryk på miniaturebilledet eller -klippet for at se det i fuldskræmsmodus. Bunden af skærmen indeholder den seneste kommentar eller en tom tekstboks til indtastning af den første kommentar.
 - En ny kommentar indtastes ved at trykke på det tomme tekstfelt for at vise tastaturet. Indtast den ønskede tekst og tryk på **Post (Slå op)**.
 - Hvis du vil se eksisterende kommentarer eller tilføje et svar, skal du trykke på kommentaren nederst på skærmen.

Sletning af arkiveret undersøgelse

Sletning af en overført undersøgelse sletter undersøgelsen fra arkivet.

➤ Sådan slettes en arkiveret undersøgelse:

1. Gennemgå de trin, der gælder for hentning af undersøgelse. Se "Visning af en overført undersøgelse" på side 12-3 for nærmere oplysninger.
2. Vælg undersøgelsen.
3. Tryk på **Delete Study (Slet undersøgelse)** for at slette undersøgelsen. Der vises et prompt for at anmode dig om at bekræfte sletningen.
4. Tryk på **Delete Study (Slet undersøgelse)**.

Kapitel 13

Brug af Butterfly Cloud

Dette kapitel indeholder oplysninger og instruktioner om brug af Butterfly Cloud for at gemme og få adgang til ultralydsundersøgelser, der er overført fra Butterfly iQ™ iOS-mobilappen.

Oversigt

Butterfly Cloud er en webbaseret applikation, der giver brugerne mulighed for at overføre ultralydsundersøgelser fra Butterfly iQ™ iOS-appen. Brugere kan få adgang til ultralydsundersøgelser, der er overført til Butterfly Cloud gennem Butterfly iQ™ iOS-appen. Afhængigt af dine rettigheder kan du få adgang til en hel organisations Butterfly iQ™ undersøgelser, der er overført til Butterfly Cloud.

En Butterfly Cloud-administrator konfigurerer arkiverne, tilføjer nye medlemmer og konfigurerer den enkelte brugers adgangsniveau.

Administratorer har mulighed for at administrere brugernes konti og konfigurere arkiver til ultralydsundersøgelser, der skal overføres til organisationens Butterfly Cloud. Når den er konfigureret, sender din administrator dig en invitationsmail med oplysninger vedrørende oprettelse af en konto for at få adgang til din organisations sky.

En organisation kan have flere arkiver. For eksempel kan Lokalhospitalet have arkiver for hver af sine afdelinger, såsom radiologi, kardiologi, skadestue og så videre.

Bemærk – Når du deler data fra Butterfly Cloud, anonymiseres de fælles data for modtageren, hvilket betyder, at alle patientens sundhedsoplysninger fjernes. Oplysningerne befinder sig i et skrivebeskyttet vindue i Butterfly Cloud. Yderligere oplysninger findes på "Deling af en undersøgelse" på side 13-10.

Opretter forbindelse til Butterfly Cloud

Når en Butterfly Cloud-teamadministrator har givet dig adgang til Butterfly Cloud, eller du har købt Butterfly Cloud, modtager du en e-mail-invitation med en webadresse, der giver adgang.

Følg instruktionerne i e-mailen for at få adgang til Butterfly Cloud og for at oprette din adgangskode.

Brug af Butterfly Cloud på din iOS-enhed sker gennem appen. Funktionaliteten i denne sektion gælder for Butterfly Cloud-webstedet, der er tilgængeligt fra en computer.

Webadresse

Når din konto er oprettet med en adgangskode, skal du bruge følgende link for at få adgang til Butterfly Cloud: <https://cloud.butterflynetwork.com>

Logge på og af

➤ **Sådan logger du på:**

1. Indtast din e-mailadresse.
2. Indtast din adgangskode.

➤ **Sådan logger du af:**

Klik på dit brugernavn i øverste højre hjørne, og vælg **Log out (Log ud)**.

Oversigt over hovedskærm

Hovedskærmen består af følgende sektioner:

- “Indstillinger” på side 13-3
- “Arkiver” på side 13-7
- “Undersøgelser” på side 13-9

Indstillinger

Du kan få adgang til følgende konfigurationssektioner ved at klikke på dit brugernavn i øverste højre hjørne:

- My Account (Min konto)
- Organization Settings* (Organisationsindstillinger)
- DICOM-forbindelser*
- Members (Medlemmer)

Bemærk – *Du skal være en organisationsadministrator for at kunne se Organization Settings (Organisationsindstillinger) og for at se DICOM Connections (DICOM-forbindelser) i indstillingsmenuen.

Konfigurering af kontoindstillinger

Du kan konfigurere følgende kontoindstillinger:

- **Add Profile Photo (Tilføj profilfoto)**, der vises med dine opdaterede undersøgelser og kommentarer
- **Change Name (Skift navn)** for at ændre dit fulde navn, som det fremstår i Butterfly Cloud
- **Change Email (Skift e-mail)** for at ændre din e-mailadresse
- **Change Password (Skift adgangskode)** for at ændre din adgangskode til Butterfly Cloud
- **Comment Notifications (Kommentarmeddelelser)**, som skal ændres, uanset om du ønsker at modtage meddelelser eller ej, når en kollega kommenterer dine billeder eller nævner dig i en kommentar. Standardindstillingen er ON (Tændt).

➤ Sådan konfigureres dine kontoindstillinger

1. Klik på dit brugernavn i øverste højre hjørne, og vælg **My account (Min konto)**.
2. Et profilfoto tilføjes ved at vælge **Add Photo (Tilføj foto)** i sektionen **Profile Photo (Profilfoto)**. Følg instruktionerne på skærmen.
3. Hvis det er relevant, skal du indtaste dit nye navn i sektionen **Account Info (Kontooplysninger)** og vælge **Change Name (Skift navn)** for at ændre navn og indtaste din nye e-mailadresse og klikke på **Change Email (Skift e-mail)** for at ændre din e-mailadresse. Følg instruktionerne på skærmen.
4. Du ændrer adgangskode ved i sektionen **Change Password (Skift adgangskode)** at indtaste din nye adgangskode og derpå indtaste din nye adgangskode igen i feltet **Confirm Password (Bekræft adgangskode)**. Klik på **Change Password (Skift adgangskode)**.
5. Hvis du vil konfigurere **Comment Notifications (Kommentarmeddelelser)**, skal du gøre et af følgende:
 - Klik i afkrydsningsfeltet **Email Notifications (Mailmeddelelser)** for at modtage mailmeddelelser. Hvis feltet ikke afkrydses, vil du ikke modtage mailmeddelelser.
 - Klik i afkrydsningsfeltet **Mobile Notifications (Mobilmeddelelser)** for at modtage mobilmeddelelser. Hvis feltet ikke afkrydses, vil du ikke modtage mobilmeddelelser.

Visning af organisationsindstillinger

Bemærk – Du skal have administratorrettigheder for at kunne ændre navnet på din organisation.

➤ **Sådan vises organisationsindstillinger:**

1. Klik på dit brugernavn i øverste højre hjørne, og vælg **Organization settings (Organisationsindstillinger)**.
2. Hvis relevant skal du klikke på **Update (Opdater)** for at ændre navnet på din organisation.

DICOM-forbindelser

Bemærk – Du skal være en organisationsadministrator for at få adgang til og konfigurere DICOM-indstillinger.

Butterfly Cloud kan tilsluttes din organisations Digital Imaging og Communications in Medicine (DICOM) -endepunkter ved hjælp af en sikker DICOM-TLS-forbindelse. Ultralydsundersøgelser, som er opnået på nogen Butterfly iQ™ i din organisation, kan overføres til Butterfly Cloud og derefter videresendes til et eller flere af dit hospitals DICOM-lagersystemer (fx billedarkiverings- og kommunikationssystemer [Picture Archiving and Communication System, PACS] eller forhandlerneutralt arkiv [Vendor Neutral Archive, VNA]). Skyen kan også forbindes til en arbejdsliste for DICOM-modaliteter (DICOM Modality Worklist, MWL) for at mindske behovet for manuel indtastning af patientdata fra brugernes side. Når de er konfigureret, kan medlemmerne af din organisation bruge arbejdslisten til at udfylde patientdatafelterne, inden de overfører undersøgelser fra Butterfly iQ™ appen.

Konfigurering af dine DICOM-forbindelser

➤ **Sådan konfigureres dine DICOM-forbindelser:**

1. Klik på dit brugernavn i øverste højre hjørne, og vælg **DICOM Connections (DICOM-forbindelser)**.
2. Klik på **View Guide (Vis guide)** i sektionen **Need Help Getting Started? (Brug for hjælp til at komme i gang?)** øverst på skærmen for at få mere information.

Konfigurering af dine arkiver til at sende til DICOM-endepunkter

Du kan konfigurere dine arkiver til automatisk at videresende undersøgelser til op til tre forskellige DICOM-endepunkter (såsom PACS eller VNA'er).

➤ Sådan konfigureres arkiver til at sende til DICOM-endepunkter:

1. Vælg arkivet fra listen **Archive (Arkiv)** i venstre side af skærmen. Arkivet åbner op midt på skærmen.
2. Klik på ikonet **Settings (Indstillinger)** i øverste højre hjørne af arkivvinduet.
3. På siden **Settings (Indstillinger)** for dit valgte arkiv skal du vælge op til tre PACS fra rullemenuerne i sektionen PACS Forwarding (Videresend) sektionen, hvortil du vil sende undersøgelser direkte fra det valgte arkiv.

Du kan vælge mellem en hvilken som helst af de tilgængelige PACS til at konfigurere med din organisations Butterfly Cloud. Yderligere oplysninger om konfigurering af PACS med Butterfly Cloud findes i "Konfigurering af dine DICOM-forbindelser" på side 13-4.

Bemærk – Et arkiv, der er konfigureret til et DICOM-endepunkt (som PACS eller VNA), vil have **DICOM**-ikonet ved siden af det i arkivlisten i venstre side af skærmen.

Fremsendelse af undersøgelser til DICOM-endepunkter en eller flere gange

DICOM Management registrerer alle DICOM-endepunkter, som en undersøgelse er sendt til. Undersøgelser kan manuelt fremsendes en eller flere gange til alle konfigurerede DICOM-endepunkter. Undersøgelser, der er blevet redigeret, kan også sendes på ny til DICOM-endepunkter.

Bemærk – Både administratorer og faste medlemmer kan fremsende undersøgelser en eller flere gange til DICOM-endepunkter.

➤ Sådan fremsendes undersøgelser en eller flere gange til DICOM-endepunkter:

1. Vælg det arkiv, der indeholder den undersøgelse, som du ønsker at sende eller sende igen. Alle undersøgelser, der er tilgængelige i det valgte arkiv, vises midt på skærmen.
2. I det højre hjørne af den undersøgelse, som du vil sende eller sende igen, skal du klikke på rullemenuikonet for at få vist menuen.
3. Vælg **DICOM Management**. Et **DICOM Management**-vindue vises med en liste over dine DICOM-forbindelser.
4. Du har mulighed for at sende undersøgelsen en eller flere gange til en eller flere af dine DICOM-forbindelser. Klik på **Send** eller **Resend (Send igen)** efter behov.

Medlemmer:

Sektionen **Members (Medlemmer)** i Butterfly Cloud angiver de medlemmer, som har adgang til arkiverne og deres adgangsniveau.

Visning af medlemmer

Medlemmer er opført i alfabetisk rækkefølge fra A til Z.

Sorteringsrækkefølgen ændres til Z-A ved at klikke på overskriften **User (Bruger)** i sektionen **Members (Medlemmer)**.

Visning af et medlems adgangsniveau

Det **Access Level (Adgangsniveau)**, der er angivet i sektionen **Members (Medlemmer)** for hvert medlem, bevilges af medlemmer, der har administratorrettigheder. Der er to adgangsniveauer:

- **Admin (Administratorer)**: Administratorer kan oprette nye arkiver og invitere og redigere medlemmer. Administratorer kan også fjerne medlemmer fra Butterfly Cloud.
- **Regular (Almindelige)** medlemmer: Medlemmer kan overføre og vise arkiver og undersøgelser og kommentere undersøgelser

Tilføjelse af nyt medlem

Bemærk – Kun medlemmer med administratorrettigheder kan tilføje nye medlemmer til Butterfly Cloud.

Tilføjelse af et nyt medlem indebærer at invitere et nyt medlem til at slutte sig til organisationen.

➤ Sådan tilføjes et nyt medlem:

1. Indtast medlemmets e-mailadresse i sektionen **Add a Member (Tilføj et medlem)**, og klik på **Send invite (Send invitation)**.

En meddelelse vises som bekræftelse på, at invitationen er sendt. Medlemmet vises i listen **Members (Medlemmer)** som **Pending Invitation (Afventer invitation)**, indtil medlemmet accepterer invitationen.

Ændring af et medlems adgangsniveau

Bemærk – Du skal have administratorrettigheder for at ændre et medlems adgangsniveau.

➤ Nye medlemmer tilføjes som almindelige medlemmer. Sådan ændres et medlems adgangsniveau:

Klik på medlemmets **Access Level (Adgangsniveau)** i sektionen **Members (Medlemmer)**, og vælg mellem følgende:

- **Make admin (Sæt til administrator)**
- **Make regular member (Sæt til almindeligt medlem)**
- **Remove from organization (Fjern fra organisation)**

Arkiver

Arkiver er opført i venstre side af skærmen. Hvert arkiv indeholder de enkelte undersøgelser, og hver undersøgelse indeholder de gemte billeder og klip.

Når du vælger et arkiv, kan du se undersøgelserne i arkivet og derefter se de gemte billeder og klip i undersøgelsen.

Oprettelse af nyt arkiv

Bemærk – Kun medlemmer, der har administratorrettigheder kan oprette et nyt arkiv.

➤ **Sådan oprettes et nyt arkiv:**

1. Klik på **Create (Opret)**. Vinduet **Create New Archive (Opret nyt arkiv)** vises.
2. Indtast en titel for arkivet i sektionen **Archive Title (Arkivtitel)** og klik derefter på **Create (Opret)**.

Valg af arkiv

Arkiver er opført i alfabetisk rækkefølge i venstre side af skærmen.

Klik på et arkiv for at vælge det.

Arkivet åbner i midten af skærmen med oplysninger om arkivet, herunder arkivnavnet, undersøgelsen eller undersøgelserne, der er opført i arkivet, og datoen for hver undersøgelse.

Sletning af arkiv

Bemærk – Når et arkiv slettes, må der ikke afgives kommentarer for de undersøgelser, der er indeholdt i det pågældende arkiv.

➤ **Sådan slettes et arkiv:**

1. Vælg arkivet fra sektionen **Archive (Arkiv)** i venstre side af skærmen. Arkivet åbner op midt på skærmen.
2. Klik på ikonet **Settings (Indstillinger)** i øverste højre hjørne af arkivvinduet.
3. Vælg **Delete Archive (Slet arkiv)** på siden **Settings (Indstillinger)** for dit valgte arkiv. Systemet beder dig bekræfte sletningen.
4. Klik på **Delete (Slet)** for at slette arkivet.

Genoprettelse af et slettet arkiv

Bemærk – Genoprettelse af et arkiv genopretter også alle de undersøgelser, som arkivet indeholder. Hvis en undersøgelse fra det pågældende arkiv imidlertid var blevet slettet, før arkivet selv blev slettet, vil undersøgelsen ikke være indeholdt i arkivet og den genoprettes ikke på det pågældende tidspunkt. Denne undersøgelse genoprettes ved først at genoprette det arkiv, som indeholder undersøgelsen (se instruktionerne nedenfor), og *derpå* genoprette den slettede undersøgelse for sig selv. Yderligere instruktioner findes i “Genoprettelse af en slettet undersøgelse” på side 13-12.

➤ **Sådan genoprettes et slettet arkiv:**

1. Klik på rullemenuen **Deleted Archives (Slettede arkiver)**, der befinder sig nederst på listen over **Archives (Arkiver)** i venstre side af skærmen.
2. Rullemenuen viser en liste over slettede arkiver. Klik på det slettede arkiv, som du ønsker at genoprette.
3. Vælg **Restore (Genopret)** midt på skærmen. Systemet beder dig om at bekræfte genoprettelsen af det slettede arkiv.
4. Klik på **Restore (Genopret)** for at genoprette det slettede arkiv.

Undersøgelser

Undersøgelser er organiseret i arkiver. Hver undersøgelse kan indeholde følgende oplysninger, hvis de tilføjes i løbet af undersøgelsen:

- Patientens navn (efternavn, fornavn, mellemnavn, titel og Suffiks)
- Køn (mand, kvinde, andet og ukendt)
- Patientens fødselsdato
- Tiltrædelsesnummer
- Patientjournalnummer (MRN)
- Undersøgelsesdato
- Miniaturebilleder og -klip, der er gemt fra undersøgelsen

Du kan udføre følgende opgaver, når du arbejder med undersøgelser:

- Søg efter en undersøgelse
- Del en undersøgelse
- Slet en undersøgelse
- Vis billeder og klip
- Hent billeder og klip

Søgning efter en undersøgelse

Du kan søge i arkiverne efter en bestemt undersøgelse ved hjælp af tekstfeltet **Search (Søg)** øverst på alle skærme.

➤ Sådan søges der efter en undersøgelse

I feltet **Search (Søg)** øverst på skærmen skal du indtaste de(t) søgeord, som du vil søge efter. Mens du taster, viser en rullemenu de tilhørende resultater. Du kan tilføje yderligere oplysninger om undersøgelsen for at indsnævre resultaterne.

Resultaterne er angivet midt på skærmen.

Redigering af undersøgelsesoplysninger

Bemærk – Kun medlemmer, der har administratorrettigheder, kan redigere undersøgelsesoplysningerne.

➤ **Sådan redigeres undersøgelsesoplysninger:**

1. Vælg det arkiv, der indeholder den undersøgelse, hvis oplysninger du ønsker at redigere.
2. Klik på et billede eller klip i undersøgelsen. Billedet vises midt på skærmen.
Sektionerne **Patient** og **Information** vises i højre side af skærmen sammen med eventuelle kommentarer, der er tilføjet om billedet.
3. Klik på **Edit (Rediger)** (over billedet). Vinduet **Edit Study Details (Rediger undersøgelsesoplysninger)** vises, hvor du kan indtaste undersøgelsesoplysninger.
4. Rediger undersøgelsesoplysningerne efter behov, og klik på **Save and Sync (Gem og synkroniser)** for at gemme og synkronisere dine ændringer.
5. Se en historik over de redigeringer, der er foretaget af undersøgelsesoplysningerne ved at klikke på **Change History (Ændringshistorik)** (over billedet).

Bemærk – Alle medlemmer kan se ændringshistorikken for en undersøgelse i deres organisation.

Deling af en undersøgelse

Du kan dele en undersøgelse med andre. Når du vælger at dele en undersøgelse, afidentificeres billedet eller klippet for patientoplysninger, og der oprettes et link, som du kan kopiere og indsætte i det meddelelsessystem, du bruger til at dele information med (fx e-mail, sms, indsætte i en rapport osv.). Linket gør modtageren i stand til at se de delte data på Butterfly Cloud. Fælles data vises for modtagere som anonymiseret (hvilket betyder, at patientens sundhedsoplysninger ikke er synlige) i et skrivebeskyttet vindue på Butterfly Cloud.

➤ **Sådan deles en afidentificeret undersøgelse:**

1. Klik på billedet eller klippet. Billedet vises midt på skærmen. Sektionerne **Patient** og **Information** vises i højre side af skærmen sammen med eventuelle kommentarer, der er tilføjet om billedet.
2. Klik på **Share de-identified study (Del afidentificeret undersøgelse)** (over billedet).
3. Klik på kopifunktionen. Linket kopieres til din enheds udsklipsholder.
4. Naviger til det sted, hvor du vil dele linket (e-mail, sms, dokument osv.) og indsæt linket.

Flytning af en undersøgelse mellem arkiver

Noter

- Medlemmer, der har administratorrettigheder, kan flytte en hvilken som helst undersøgelse fra et arkiv til et andet. Almindelige medlemmer kan flytte en undersøgelse, som de har oprettet.
 - Når en undersøgelse flyttes fra et arkiv til et andet, sendes undersøgelsen til eventuelle nye DICOM-endepunkter, som det nye arkiv er tilsluttet. Undersøgelser, der blev sendt manuelt til DICOM-endepunkter, påvirkes ikke.
-

➤ Sådan flyttes en undersøgelse til et andet arkiv:

1. Vælg det arkiv, der indeholder den undersøgelse, som du ønsker at flytte.
2. I det højre hjørne af undersøgelsen skal du klikke på rullemenuikonet for at få vist menuen. Vælg **Move Study (Flyt undersøgelse)**. Vinduet **Select Destination Archive (Vælg destinationsarkiv)** vises.
3. Vælg den nye arkivdestination. Undersøgelsen flyttes til det nye arkiv og placeres automatisk det rigtige sted i henhold til den dato, hvor den blev overført i dette arkiv.

Sletning af en undersøgelse

**FORSIGTIG!**

Når en undersøgelse slettes, slettes den fra arkivet. Sørg for, at nødvendige billeder overføres til din journal, inden du sletter dem.

➤ **Sådan slettes en undersøgelse:**

1. Vælg det arkiv, der indeholder den undersøgelse, som du ønsker at slette.
2. I det højre hjørne af undersøgelsen skal du klikke på rullemenuikonet for at få vist menuen.
3. Vælg **Delete study (Slet undersøgelse)**. Systemet beder dig bekræfte sletningen.
4. Klik på **Delete (Slet)** for at slette undersøgelsen.

Genoprettelse af en slettet undersøgelse

Slettede undersøgelser opføres i sektionen **Deleted Studies (Slettede undersøgelser)** nederst i venstre side af skærmen.

Bemærk – Hvis du gerne vil genoprette en slettet undersøgelse, skal arkivet, hvor det oprindeligt befandt sig, være tilgængeligt. Hvis dette arkiv blev slettet, skal du først genoprette arkivet og derefter genoprette den slettede undersøgelse. Yderligere instruktioner findes i “Genoprettelse af et slettet arkiv” på side 13-8.

➤ **Sådan genoprettes en slettet undersøgelse:**

1. Klik på **Deleted Studies (Slettede undersøgelser)** nederst i venstre side af skærmen. De slettede undersøgelser vises midt på skærmen.
2. I det højre hjørne af undersøgelsen skal du klikke på rullemenuikonet for at få vist menuen.
3. Vælg **Restore deleted study (Genopret slettet undersøgelse)**. Systemet beder dig om at bekræfte genoprettelsen af den slettede undersøgelse.
4. Klik på **Restore (Genopret)** for at genoprette undersøgelsen.

Arbejde med billeder og klip

Billeder og klip, der blev overført til Butterfly Cloud, omfatter alle anmærkninger (lineære målinger og ellipsemålinger og tekstanmærkninger), som blev anført på billedet. Hvert billede og klip indeholder patientoplysninger samt et område, hvor der kan indføres kommentarer om elementet. Klip har dette ikon: .

Bemærk – Alle medlemmer, der har adgang til undersøgelsen, kan se kommentarerne.

Brug kommentarfunktionen til at markere andre brugere for at se nærmere på et billede eller et klip og modtage feedback.

Visning af billeder og klip

➤ **Billeder, klip og indtastning af kommentarer ses på følgende måde:**

1. Klik på billedet eller klippet. Billedet vises midt på skærmen. Sektionerne **Patient** og **Information** vises i højre side af skærmen sammen med eventuelle kommentarer, der er tilføjet om billedet eller klippet.
2. Indtast en kommentar ved at skrive i sektionen **Add comment (Tilføj kommentar)** og derpå klikke på **Comment (Kommentar)**. Din kommentar vises på listen med dine initialer.
3. Medlemmer af din organisation kan markeres ved at taste @ efterfulgt af medlemmets navn (fx @Kathy). Når du taster, foreslås mulige medlemmer. Klik på et medlems navn for at vælge det.
4. For at se det næste billede eller klip i undersøgelsen skal du klikke på venstre eller højre pil. Klip begynder automatisk at spille.

Brug klippekontrollfunktionerne til at afspille klippet og sætte det på pause, slå lyden til og fra og vise klippet i fuldskærmstilstand.

Hentning af et billede eller et klip

Du kan hente et billede eller et klip.

➤ **Sådan hentes et billede eller et klip:**

1. Vælg arkivet, og vælg derpå den undersøgelse, der skal gennemgås.
2. Vælg det billede eller klip, der skal hentes.
3. Vælg **Download**. Systemet vil muligvis bede dig om at angive downloadinformationen.
4. Følg instruktionerne på skærmen.

Meddelelsescenter

Meddelelser modtaget på Butterfly Cloud vises i Notification Center (Meddelelsescenter).

Ikonet for Notification Center (Meddelelsescenter)  sidder i øverste højre hjørne i Butterfly Cloud. Der vises meddelelser om kommentarer til undersøgelser.

Meddelelser, der ikke er set, repræsenteres af et lille blå nummer på Notification Center (Meddelelsescenter) -ikonet. Når Notification Center (Meddelelsescenter) åbnes, vises dette nummer. Ulæste undersøgelser vises stadig i Notification Center (Meddelelsescenter) med en blå prik.

Hvis alle undersøgelser markeres som **read (læst)** ryddes alle blå prikker.

Oplysninger om konfigurerings af meddelelsesindstillinger findes i "Konfigurerings af dine systemindstillinger" på side 4-4.

Yderligere oplysninger om den type meddelelser, der er i Notification Center (Meddelelsescenter), findes i vidensbasen på support.butterflynetwork.com.

Kapitel 14

Vedligeholdelse

Dette kapitel indeholder oplysninger og instruktioner om opbevaring, transport, rengøring og desinfektion af sonden.

Vedligeholdelse af sonden

Opbevaring og transport



FORSIGTIGHEDSREGLER!

- Undgå at opbevare proben, hvor sonden eller dens kabel let kan beskadiges.
 - Undgå at transportere sonden, medmindre den er ordentligt understøttet og fastgjort. Fastgør kablet omhyggeligt til sonden, når den transporteres eller bæres. Undgå at svinge sonden eller udelukkende holde sonden i sit kabel.
-

Sonden bør opbevares under rene og tørre forhold med moderate temperaturer.


Følg disse trin ved daglig opbevaring og transport:

- Når sonden opbevares, vikles kablet rundt om sonden, så der er lidt kabel i bunden af sonden. Se Figur 14-1 for yderligere oplysninger.
- Undgå at placere eller opbevare sonden på steder, hvor det er for varmt eller for koldt, eller der er direkte sollys.
- Undgå at placere eller opbevare med andet udstyr eller genstande, som muligvis kan beskadige sonden, især ansigtet.
- Undgå kontaminering ved at:
 - Følge rengørings- og desinficeringsanvisningerne. Se "Rengøring og desinfektion af sonden" på side 14-2.
 - Sørge for, at udstyret er tørt.
 - Håndtere sonden forsigtigt for at undgå at beskadige udstyret.

Bemærk – Udsæt ikke den interne elektronik for temperaturer over 70 °C.

Oplysninger om egnede miljøforhold under betjeningen, herunder temperaturforhold under kort opbevaring, findes i Tabel 17-4.

Figur 14-1 Omvikling af kablet

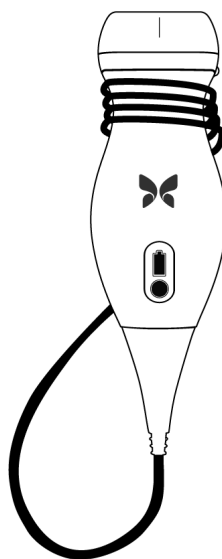

Rengøring og desinfektion af sonden

Dette afsnit indeholder oplysninger og instruktioner om hensigtsmæssig rengøring og desinfektion af Butterfly iQ™ sonden. Ved at følge disse instruktioner undgås desuden at beskadige sonden under rengøring og desinfektion.



FORSIGTIG!

Rengør kun sonden med godkendte rengøringsprodukter og vådservietter. Forkerte rengørings- eller desinfektionsmetoder eller brug af ikke-godkendte rengørings- og desinfektionsløsninger kan beskadige udstyret.

Rengøring af sonden



FORSIGTIGHEDSREGLER!

- Undgå at lade væske trænge ind i elektriske dele eller metaldele af kabelstikket under rengørings- og desinfektionsprocessen. Væsken kan forårsage skade i disse områder.
 - Undgå at sprøjte væske på din mobilenheds berøringsskærm under scanning og rengøring. Væsken kan forårsage skade.
-

➤ **Sådan rengøres sonden:**

1. Hver gang sonden har været i brug, skal du bruge en af de anbefalede vådservietter (Super Sani-Cloth® kimdræbende vådservietter til engangsbrug fra PDI, Inc., Super Sani-Cloth® AF3 vådservietter til engangsbrug fra PDI, Inc. eller en fnugfri klud fugtet med vand) til at fjerne ultralydstransmissionsgel fra sonden.
2. Afbryd sondens forbindelse fra mobilenheden.
3. Aftør sonden, aflastningsbåndet, kablet og stikket med en af de anbefalede vådservietter i et (1) minut, og indtil det er synligt rent.
4. Skift vådservietterne efter behov, og gentag ovenstående trin, indtil sonden er synligt ren.
5. Gør sonden tør ved at bruge en blød klud til at opsuge væsken. Linsen må ikke aftørres. Tør resten af sonden, kablet aflastningsbåndet og stikket.
6. Undersøg sonden visuelt i et veloplyst område for at sikre, at alle overflader er rene. Hvis sonden ikke er ren, gentages ovenstående rengøringsproces.
7. Bortskaf rengøringsmaterialet i overensstemmelse med alle gældende forskrifter.

Desinficering af sonden

Når sonden er rengjort, skal du desinficere sonden.

Det anbefales, at du bruger Super Sani-Cloth® kimdræbende engangsservietter fra PDI, Inc eller blegemiddel (0,6 % natriumhypochlorit) og rene fnugfri servietter.



ADVARSEL:

Undersøg altid sonden før og efter rengøring, desinfektion eller brug. Undersøg linsens forside, kabel, hus, søm og stik for tegn på beskadigelser såsom revner, spåner, slid eller lækager. For at undgå risikoen for elektrisk fare må du ikke bruge sonden, hvis der er tegn på skade.

➤ Sådan desinficeres sonden med Super Sani-Cloth® kimdræbende engangsservietter fra PDI:

1. Aftør sonden, kablet, aflastningsbåndet og stikket med en Super Sani-Cloth® kimdræbende engangsserviet. Brug yderligere friske vådservietter efter behov.
2. Sørg for, at den behandlede overflade forbliver synlig våd i mindst to (2) minutter, og vær specielt opmærksom over for sømme, åbninger, pakningsmateriale og forsænkede områder.
3. Brug yderligere friske vådservietter efter behov til at sikre to (2) minutter løbende kontakttid.
4. Lad den lufttørre.
5. Når du er færdig med rengøring og desinfektion, skal du undersøge sonden, aflastningsbåndet, kablet og kontakten for tegn på skade eller slid.

➤ For at desinficere sonden ved brug af blegemiddel (0,6 % natriumhypochlorit) og rene, fnugfri klude:

1. Tør sonden, kablet, aflastningsbåndet og stikket med en ren, fnugfri klud *fugt* (fugtig men ikke dryppende) med blegemiddel (0,6 %). Brug yderligere friske vådservietter efter behov.
2. Sørg for, at den behandlede overflade forbliver synlig våd i mindst ti (10) minutter, og vær specielt opmærksom over for sømme, åbninger, pakningsmateriale og forsænkede områder.
3. Brug yderligere friske vådservietter efter behov til at sikre ti (10) minutter løbende kontakttid.
4. Lad den lufttørre.
5. Når du er færdig med rengøring og desinfektion, skal du undersøge sonden, aflastningsbåndet, kablet og kontakten for tegn på skade eller slid.

Desinficering af mobilenheden

Det kan være nødvendigt at desinficere din mobilenhed efter brugen. Yderligere oplysninger findes i bestemmelserne og hjemmesiden knyttet til din enhed.

Opdatering af sonden og app-softwaren

Opdateringer af Butterfly iQ™ appen og sonden håndteres gennem Apples App Store.

Hold din mobilenheds operativsystem, og Butterfly iQ™-appen opdateret for at sikre, at du har den nyeste version.

Udførelse af diagnostisk test på sonde

Butterfly iQ™ er i stand til at udføre brugerinitierede diagnostiske selvtests, der er beregnet til at vurdere, i hvor høj grad systemet er klar til brug. Der er imidlertid ingen test, som kan sikre en acceptabel ydeevne eller opdage misbrug, skade eller fejl, der opstod efter den seneste test er afsluttet.

Udfør den diagnostiske test med jævne mellemrum. Under normal brug er bedste praksis at teste månedligt.

Den diagnostiske test er kun for Butterfly iQ™ ultralydssonde. Appen kan ikke vurdere den mobile enheds skærmintegritet. Butterfly stiller ikke krav om, at der testes med et fantom, eller at mobile enheder testes.

Den diagnostiske test gennemgår en række diagnostiske tests og meddeler dig, når alle tests er blevet gennemført.

➤ Sådan udføres den diagnostiske test på sonden:

1. Sørg for, at sonden er forbundet til en understøttet mobil enhed med Butterfly iQ™ appen installeret.
2. Log på appen med dine loginoplysninger.
3. Tryk på din brugers avatar (eller dine initialer) i øverste venstre hjørne på billeddannelseskærmen.
4. Tryk på  for at vise skærbilledet **Settings (Indstillinger)**.
5. Tryk på **My iQ (Min iQ)** for at vise skærbilledet **My iQ (Min iQ)**.
6. Tryk på **Run Diagnostics (Kør diagnostik)** og vælg derpå **Start Probe Diagnostics (Start sondediagnostik)** for at starte testen.
 - Hvis selvtesten er bestået, viser systemet en meddelelse om, at systemet er gået. Du kan sende resultaterne til Butterfly Support ved at trykke på **Send Results to Support (Send resultaterne til support)**.
 - Hvis selvtesten svigter, skal du trykke på **Send Results to Support (Send resultater til support)**.

En liste over understøttede mobile enheder findes på www.butterflynetwork.com/specs. Se "Opnåelse af support" på side 16-1 for yderligere oplysninger.

Kapitel 15

Fejlfinding

Dette kapitel indeholder oplysninger og instruktioner om fejlfinding af systemet.



ADVARSEL:

Brug ikke sonden, hvis der er noget tegn på skade. Kontakt support. Se "Opnåelse af support" på side 16-1 for yderligere oplysninger.

Fejlfinding

Tabel 15-1 angiver problemer og løsninger til hjælp ved fejlfinding. Se "Opnåelse af support" på side 16-1 for yderligere oplysninger.

FORSIGTIG! Hvis du ignorerer appens advarsler og meddelelser, kan det medføre, at systemet holder op med at fungere.

Noter

- Hvis du ikke kan løse et problem ved hjælp af Tabel 15-1, skal du notere problemet og rapportere det til Support og bede om hjælp. Yderligere oplysninger findes i "Kontakt Butterfly Support" på side 16-1.
- Tilkald en sundhedsmedarbejder i nødstilfælde, hvis fejlfinding viser at en patient har et sundhedsproblem, og at det ikke er et problem med mobilenheden.
- Indgiv klager eller hændelser ved at kontakte det amerikanske FDA Problem Reporting Program, MedWatch, på 1-800-332-1088 eller på internettet www.fda.gov/Safety/MedWatch/

Tabel 15-1 Fejlfinding

Problem	Løsning
App vil ikke tænde	Frakobl sonden, slet og genindstiller appen.
App går ned	Luk appen, og genstart appen. Tjek efter softwareopdateringer i Apple App Store.
App åbner, men vil ikke scanne billeder	Luk appen, og genstart appen. Sørg for, at sonden er opladet. Hvis sonden er opladet, skal du kontakte Support.
Problemer med billeddannelse	
Billedkvalitet degraderet	Sørg for, at du bruger nok godkendt ultralydsgel. Hvis kvaliteten ikke bliver bedre, skal du kontakte Support.
Blank skærm eller skærm opdaterer ikke længere.	Luk appen, og genstart appen. Kobl sonden fra den mobile platform (mobilenhed) og kobl til igen.

Problem	Løsning
Billeddegradering eller forekomst af billedartefakter	Sørg for at bruge den rigtige forudindstilling, og at der anvendes en passende dybden til scanning af anatomien. Sørg for, at lysstyrken på skærmen er indstillet til den anbefalede indstilling på 65 %. Start sondens selvtest for at finde ud af, om sonden er beskadiget. Se "Udførelse af diagnostisk test på sonde" på side 14-5 for nærmere oplysninger.
Problemer i undersøgelsen	
Kan ikke overføre en undersøgelse; undersøgelsen forbliver i udbakken	• Sørg for, at din mobilenhed har netværksforbindelse (wi-fi eller en mobilforbindelse). • Der udføres muligvis vedligeholdelse på Butterfly Cloud-tjenesten, eller den kan være utilgængelig. Prøv igen senere. Yderligere oplysninger findes på "Kontakt Butterfly Support" på side 16-1.
Problemer med sonden	
Vedvarende fejl på sondeforbindelsen	Udfør en total nulstilling: 1. Afbryd sondens forbindelse fra mobilenheden. 2. Tryk og hold sondens batteriindikator-knap inde i 10-15 sekunder, indtil lysdioderne blinker. 3. Oplad sonden. Anvisninger findes i "Opladning af sonden" på side 4-6. 4. Gentag trin 2, og prøv derefter at tilslutte sonden til den mobile enhed igen.
Sonden vil ikke oplade	

Problem	Løsning
App-advarsler og -meddelelser	
App åbner, men kan ikke logge på: Device Passcode Required (Enhedens adgangskode skal angives)	Dette indikerer, at din mobilenhed ikke har en adgangskode. Butterfly iQ™ kræver, at mobilenheden har en adgangskode til at beskytte patientens datasikkerhed. Tryk på Open Settings (Åbn indstillinger) for at aktivere og konfigurere adgangskoden for din mobilenhed.
App åbner, men kan ikke logge på: Login Error (Loginfejl)	• Sørg for, at din mobilenhed har netværksforbindelse (wi-fi eller en mobilforbindelse). • Prøv at genindtaste dine legitimationsoplysninger • Nulstil din adgangskode ved hjælp af en browser på en stationær computer for at få adgang til Butterfly Cloud (cloud.butterflynetwork.com). Hvis ovenstående trin ikke lykkes, kan det tyde på, at der udføres vedligeholdelse på Butterfly Cloud-tjenesten, eller den ikke er tilgængelig. Prøv igen senere. Yderligere oplysninger findes på "Kontakt Butterfly Support" på side 16-1.
Advarslen Hardware Recall (Tilbagekaldelse af hardware) vises	Sonden kan ikke bruges til billeddannelse, hvis denne advarsel vises. Tryk på Contact Support (Kontakt Support) , og følg anvisningerne på skærmen. Yderligere oplysninger findes på "Kontakt til support gennem Butterfly iQ™ appen" på side 16-1.
Advarslen Forced Log Out (Påtvunget log af) vises	Dette indikerer, at din mobilenhed ikke længere har en adgangskode. Butterfly iQ™ kræver, at mobilenheden har en adgangskode til at beskytte patientens datasikkerhed. Tryk på Settings (Indstillinger) for at aktivere og konfigurere adgangskoden for din mobilenhed.
Advarslen Cloud Access has Ended (Cloud-adgang er ophørt) vises	Dette angiver, at Butterfly Cloud-abonnementet er ophørt. Forny dit abonnement, eller kontakt din administrator for at få dit abonnement fornyet, eller kontakt Butterfly Support. Yderligere oplysninger findes på "Kontakt Butterfly Support" på side 16-1.
Advarslen Probe Temporarily Disabled (Sonde midlertidigt deaktiveret) vises	Denne advarsel vises, når din mobilenhed ikke har været tilsluttet til internettet inden for de sidste 30 dage. Genetabler forbindelsen til internettet, og tryk på Refresh (Opdater) .
Advarsel Scanning can resume after cooling is complete (Scanning kan genoptages, efter at afkølingen er færdig)	Denne advarsel vises, når sonden er blevet for varm til, at der kan scannes. Systemet begrænser patientkontaktemperaturen og scanner ikke ved eller over 43 °C (109 °F). Systemet afgiver denne advarsel, før det lukker ned. Afbryd forbindelsen til sonden, og lad den køle af. Du kan få adgang til andre funktioner i appen, mens sonden er koblet fra.

Kapitel 16

Opnåelse af support

Dette kapitel indeholder kontaktoplysninger, hvis du har brug for support til sonden og Butterfly iQ™-appen.

Kontakt til support gennem Butterfly iQ™ appen

Du kan kontakte Butterfly Support direkte via Butterfly iQ™-appen og indsende en anmodning om hjælp.

➤ **Sådan opnår du support:**

1. Tryk på din brugers avatar (eller dine initialer) i øverste venstre hjørne på billedannelseskærmen.
2. Tryk på  for at vise skærbilledet **Settings (Indstillinger)**.
3. Rul ned to sektionen **Help (Hjælp)**.
4. Brug valgene **Request Help (Anmod om hjælp)**, **Submit Feedback (Send feedback)** og **Report a Bug (Rapporter en fejl)** for sende meddelelser direkte til vores kundesupportteam.
5. Vælg din meddelelsestype og indtast din meddelelse. Du kan også tilføje billeder fra din telefons billedlager.
6. Klik på **Send**. Anmodningen sendes til Butterfly Support.

Butterfly Support svarer på din anmodning via e-mail.

Kontakt Butterfly Support

Butterfly Network, Inc.
530 Old Whitfield Street
Guilford, CT 06437 USA

Telefon: +1(855) 296-6188

FAX: +1 (203) 458-2514

Generelle forespørgsler: info@butterflynetwork.com

Support og service: support@butterflynetwork.com

Hjemmeside: www.butterflynetwork.com



Autoriseret europæisk repræsentant

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
Holland

Australsk sponsor

Emergo Australia
Level 20, Tower II
Darling Park
201 Sussex Street
Sydney, NSW 2000
Australien

Kapitel 17

Specifikationer

Dette kapitel indeholder de tekniske specifikationer for sonde- og Butterfly iQ™ - softwareapplikationen. Det indeholder også lovgivningsmæssige oplysninger samt instruktioner om genbrug og bortskaffelse af udstyr.

Krav til mobilenhed

Appen Butterfly iQ™ er kun tilgængelig til download, installation og anvendelse på en Apple iOS-mobilenhed. Der gælder følgende krav:

Tabel 17-1 Krav til mobilenhed

Punkt	Krav
Mobilenhed	Fremstillet til iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad Air 3. generation, iPad mini 5. generation, iPad Pro (33 cm [12,9"]), iPad Pro (28 cm [11"]), iPad Pro (27 cm [10,5"]), iPad 6. generation, iPad 5. generation, iPad Pro (25 cm [9,7"])
Operativsystem	iOS version 11.0 eller nyere



ADVARSEL:

Brug ikke Butterfly iQ™-applikationen på en mobilenhed, der ikke opfylder mindstekravene. Hvis Butterfly iQ™-applikationen bruges på en mobilenhed, der ikke opfylder mindstekravene, kan det påvirke ydeevnen og billedkvaliteten og eventuelt medfører fejldiagnose.

Bemærk — The Butterfly iQ™ applikationen påvirker ikke den mobile enheds OS-indstillinger.

Systemspecifikationer

Tabel 17-2 angiver systemspecifikationerne.

Tabel 17-2 Systemspecifikationer

Punkt	Specifikation
Sondens dimensioner	185 x 56 x 35 mm (7,2 x 2,2 x 1,4 tommer)
Sondens vægt	313 gram (0,69 pund)
Tænd/sluk	Batteri (genopladeligt)
Batteriets levetid	≥ 2 timer i B-modus (typisk nyt batteri ved 25 °C). ≥ 2 timer henviser til løbende scanning vs. traditionelle scanningsmønstre.
Sprog	Brugergrænsefladen og den ledsagende dokumentation fås kun på engelsk.
Skærm	Variabel
Min/maks scanningsdybde	2 cm min/30 cm maks
Ultralydschip	Indbygget CMOS-chip
Transducere	9000-element CMUT
Frekvensområde	1-10 MHz

Sondens batterioplader

Tabel 17-3 angiver specifikationerne for sondens batterioplader.

Tabel 17-3 Specifikationerne for sondens batterioplader

Punkt	Specifikation
Standard for trådløs opladning	Qi-kompliant
Indgangsspænding	5 V jævnstrøm - 2 A
Indgangsgrænseflade	Mikro-USB
Trådløs opladningseffekt	5 W
Trådløs opladningseffektivitet	≥ 73 %
Beskyttelse	Overspændingsbeskyttelse, overstrømsbeskyttelse
Dimensioner:	121 x 62 x 19 mm
Farve	Sort

Anbefalede ultralydsgeler

Optimal transmission af akustisk energi mellem patienten og sonden foretages med en ultralydstransmissionsgel.

Følgende ultralydsgeler anbefales:

- Aquasonic[®] af Parker
- Clear Gel Image Singles af Sonotech
- Kendall[™] Ultrasound Gel af Covidien
- LiguaSonic Ultrasound Gel af Medline Industries
- SCAN[®] Ultrasound Gel af Parker
- STERILE Aquasonic[®] 100 Ultrasound Transmission Gel af Parker

**FORSIGTIG!**

Brug kun godkendte geler eller væsker. Ikke-godkendte geler og væsker kan beskadige sonden.

Driftsmiljø

Tabel 17-4 angiver driftsmiljøet for Butterfly iQ™ sonden alene. Nærmere oplysninger om den mobilenhed, som du kører Butterfly iQ™-appen på, er beskrevet i den dokumentation, der følger med din mobilenhed.

Tabel 17-4 Driftsmiljø

Punkt	Driftsgrænser
Fugtighed	Mellem 18-93 % ikke-kondenserende
Højde over havet	Mellem 46 m (150 fod) under havets overflade og 3000 m (10,000 fod) over havets overflade
Driftstemperatur	Mellem 5 °C og 39 °C
Temperatur ved kort opbevaring	Sonden kan modstå tre dages opbevaring ved temperaturer mellem -20 °C og 50 °C

Elektromagnetisk konformitet (EMC)

Butterfly iQ™ er beregnet til at give adgang til diagnostisk ultralydsbilleddannelse og måling af anatomiske strukturer og væsker af kvalificeret og uddannet sundhedspersonale. Elektromagnetiske felter kan imidlertid forårsage forvrængning eller degradering af denne information, hvilket påvirker denne ydeevne.

Butterfly iQ™ er designet til brug i elektromagnetiske miljøer, der er angivet i Tabel 17-5 og Tabel 17-6. For at undgå udstrålede og ledede elektromagnetiske forstyrrelser skal kunden eller brugeren af Butterfly iQ™ sikre sig, at den anvendes inden for de her angivne specifikationer.

Tabel 17-5 Elektromagnetiske emissioner

Vejledning og fabrikantdeklaration - elektromagnetiske emissioner		
Emissionstest	Overensstemmelse	Elektromagnetisk miljø – vejledning
RF-emission CISPR 11 11EN55011	Gruppe 1	Butterfly iQ™ Ultralydssystemet bruger kun RF-energi til dets interne funktion. Dets RF-emissioner er derfor meget lave, og det er usandsynligt, at de vil skabe interferens i nærtstående elektronisk udstyr.
RF-emission CISPR 11EN55011	Klasse A	Butterfly iQ™ ultralydssystemet er egnet til brug i alle slags faciliteter, undtagen i private hjem og faciliteter med direkte forbindelse til det offentlige lavspændingsnet, der forsyner privatboliger.
Harmonisk emission EN/IEC 61000-3-2	Ikke relevant	
Spændingsudsving/ flimmeremissioner EN/IEC 6100-3-3	Ikke relevant	

Tabel 17-6 Elektromagnetisk immunitet

Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet			
Immunitetstest	EN/IEC 60601-testniveau	Overensstemmelse niveau	Elektromagnetisk miljø – vejledning
Elektrostatisk udladning (ESD) EN/IEC 61000-4-2	±8 kV kontakt ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft	±8 kV kontakt ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft	Gulve skal være af træ, beton eller keramikfliser. Hvis gulvene er belagt med syntetisk materiale, skal den relative fugtighed være mindst 30 %.
Elektriske transienter/ bursts EN/IEC 61000-4-4	Ikke relevant. Denne enhed kører ikke på vekselstrøm.	Ikke relevant.	Kvaliteten af netspændingen skal svare til et typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.
Magnetfelt med netfrekvens (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m@50 Hz eller 60 Hz 3 ortogonale retninger	30 A/m 50 og 60 Hz	Netfrekvente magnetfelter skal være på niveauer, der er karakteristiske for et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø.

Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet			
Immunitetstest	EN/IEC 60601-testniveau	Overensstemmelsesniveau	Elektromagnetisk miljø – vejledning
Ledet RF IEC 61000-4-6	3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 V i ISM-bånd mellem 150 kHz og 80 MHz 80 % AM ved 1 kHz	3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 V i ISM-bånd mellem 150 kHz og 80 MHz 80 % AM ved 1 kHz	Bærbart og mobilt radiofrekvens (RF)-kommunikationsudstyr må ikke benyttes tættere på nogen del af Butterfly iQ™ ultralydssystemet, inklusive kabler, end den anbefalede separationsafstand beregnet ud fra den ligning, der gælder for senderens frekvens.
Udstrålet RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz til 2,7 GHz	10 V/m 80 MHz til 2,7 GHz	Ligninger og vigtige anbefalede afstande er vist i Tabel 17-7. Feltstyrker fra stationære RF-sendere, fastslået ud fra en undersøgelse af det elektromagnetiske område,^a skal ligge under overholdelsesniveauet i hvert frekvensområde.^b Interferens kan forekomme i nærheden af udstyr mærket med følgende symbol 
^a Feltstyrker fra stationære sendere, såsom basestationer for (mobile/trådløse) radiotelefoner og landmobilradioer, amatørradio, AM og FM radioudsendelser og TV-udsendelser, kan rent teoretisk ikke forudsiges med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagnetiske miljø, der skyldes faste RF-sendere, bør det overvejes at udføre en undersøgelse af stedet. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor Butterfly iQ™ ultralydssystemet anvendes, overskrider det gældende RF-kompliansniveau ovenfor, skal Butterfly iQ™ ultralydssystemet holdes under opsyn for at sikre, at der foreligger normal drift. Hvis unormal ydelse observeres, kan det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger, såsom at vende eller flytte Butterfly iQ™ ultralydssystemet. ^b Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrken være mindre end 3 V/m.			

Separationsafstande

Enheder som mobiltelefoner, radiosendere og transceivere sender radiobølger (RF), som kan skabe forstyrrelser. Butterfly iQ™ er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor der er regulering af udstrålede RF-forstyrrelser.

Hvis der udvises udstrålede og ledede elektromagnetiske forstyrrelser, og det påvirker ydelsen, skal brugeren eller kunden træffe foranstaltninger for at afbøde virkningerne, herunder flytning eller reorientering af systemet.

Tabel 17-7 Anbefalede separationsafstande

Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og ultralydsenheden			
Ultralydsenheden er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor der er regulering af udstrålede RF-forstyrrelser. Kunden eller brugeren af ultralydsenheden kan medvirke til at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og ultralydsenheden som anbefalet nedenfor i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.			
Senderens maksimale nominelle udgangseffekt (P, i watt)	Sikkerhedsafstand i henhold til senderens frekvens (d i meter)		
	150 kHz til 80 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	80 MHz til 800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	800 MHz til 2,5 GHz $d = 2.3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23
For sendere med en maksimal nominel udgangseffekt, som ikke er angivet ovenfor, kan den anbefalede sikkerhedsafstand d i meter (m) skønnes ved anvendelse af den ligning, der gælder for sendefrekvensen, hvor P er senderens maksimale nominelle effekt i watt (W) ifølge senderens producent. BEMÆRK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højere frekvensområde. BEMÆRK 2: Disse retningslinjer vil muligvis ikke gælde i alle situationer. Elektromagnetisk bølgeudbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, objekter og mennesker.			

Akustisk udgangseffekt

Ultralydssikkerhed

Uddannede fagfolk skal udføre diagnostiske ultralydsprocedurer på forsvarlig vis til det tilsigtede formål. Butterfly iQ™ og dets termiske (TI) og mekaniske (MI) sikkerhedsgrænser er indstillet til industristandarderne en som Track 3-enhed og vises på skærmen. TI'en vises som enten blødt væv (TIS), knogle (TIB) eller kranieknogle (TIC), og kun et af disse indekser vises ad gangen på grundlag af den kliniske standardindstilling for en valgt undersøgelse. TI og MI vises i trin på 0,1 over området fra 0,0 til maksimal udgangsværdi.

Termisk indeks (TI) er den anslåede for temperaturforøgelsen af blødt væv eller knogle, og dets grænser er fastsat på grundlag af NEMA-standard, UD 3: "Standard for Real-Time Display of Thermal and Mechanical Acoustic Output Indices on Diagnostic Ultrasound Equipment" (Standard for realtidsvisning af termiske og mekaniske indikatorer for akustisk output på diagnostisk ultralydsudstyr), Revision 2 og IEC 60601-2-37. Elektromedicinsk udstyr. Del 2-37: Særlige krav til sikkerheden forbundet med ultralydsudstyr til medicinske, diagnostiske og overvågningsmæssige formål.

Mekanisk indeks er den forventede sandsynlighed for vævsskader på grund af kavitation og dets grænser (1,9) som fastsat af FDA's retningslinjer, "Information for Manufacturers Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers" (Information til producenter, der søger markedsføringen af diagnostiske ultralydssystemer og transducere).

I_{spta} er den spatiale peak temporale gennemsnitsintensitet (Spatial Peak Temporal Average Intensity) og den maksimale grænse på I_{spta} er 720 mW/cm^2 , der også er fastsat af, "Information for Manufacturers Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers".

Selvom denne akustiske outputindstilling er blevet begrænset i overensstemmelse med disse standarder, skal brugeren oplæres i brug af ultralydsapparatet og være opmærksom på muligheden for ultralydsinducerede biologiske virkninger og at minimere patientens udsættelse for potentielle skadelige virkninger og unødvendig risiko. Ultralydbrugere bør være kyndige i ultralydsprocedurer og kunne udføre dem ved outputniveauer og eksponeringstider, der er så lave som det med rimelighed kan opnås (As Low As Reasonably Achievable, ALARA). ALARA defineres som ultralydseksponering, der holdes så lav som det med rimelighed kan opnås, samtidig med at diagnostiske oplysninger optimeres.

ALARA-uddannelse leveres af American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM) i pjecen "Medical Ultrasound Safety" (Sikkerhed ved medicinsk ultralydsbehandling). Denne pjece leveres som et PDF-link i Butterfly iQ™-appen og Butterfly Cloud-webinterfacet. Den indeholder praktisk indlæring og uddannelsesmateriale om biologiske og biofysiske virkninger af ultralydsbehandling, forsigtig brug og implementering af ALARA.

Usikkerhed omkring visning af output

MI- og TI-outputvisningens nøjagtighed afhænger af målesystemets præcision, tekniske antagelser inden for den akustiske model, der bruges til at beregne parametrene, og variabiliteten i sonderens akustiske output. Butterfly sammenligner både intern og tredjeparts akustik og bekræfter, at begge målinger er inden for den anbefalede visningskvantificering på 0,2, som standarderne foreskriver. Bemærk, at de MI- og TI-værdier, der vises på enheden, ikke vil overstige de maksimale globale værdier (angivet i tabellerne nedenfor) med mere end 0,2.

Track 3-specifikke oplysninger

Butterfly iQ™ er i overensstemmelse med FDA Track 3-outputindstillinger, outputvisning og ALARA-sikkerhedsprincipper. Følgende tabeller støtter Track 3 akustisk output og indeholder de globale maksimale akustiske outputindekser for sonden og alle dens kliniske udgangsmoduser.

Tabel 17-8 Sammenfatningssystem for sonde/mode-kombination: Butterfly iQ™

Sondemodel	Driftsmodus						
	B	M	PWD	CWD	Farvedoppler	Kombineret (angiv hvilken)	Andet* (angiv hvilken)
Butterfly iQ™	X	X			X	B+M mode	

Anvendte symboler

Tabel 17-9 angiver og beskriver de anvendte symboler.

Tabel 17-9 Symboler

Symbol	Beskrivelse
MI	Mechanical Index (mekanisk indeks).
TISscan	Soft Tissue Thermal Index (termisk indeks for blødvæv) i en automatisk scanningsmodus.
TISikke-scan	Soft Tissue Thermal Index (termisk indeks for blødvæv) i en ikke-automatisk scanningsmodus.
TIB	Bone Thermal Index (termisk indeks for knogle).
TIC	Cranial Thermal Index (termisk indeks for kranie).
A _{aprt}	Området med den aktive åbning (kvadratcentimeter).
p _{r.3}	Det dæmpede peak negative tryk knyttet til transmissionsmønsteret, der ligger til grund for den værdi, der rapporteres under MI (megapascal).
W ₀	Ultralydseffekten, med undtagelse af TISscan, i hvilket tilfælde ultralydseffekten går gennem et vindue på én centimeter (milliwatt).
W _{.3(z₁)}	Den reducerede ultralydseffekt ved aksial afstand z ₁ (milliwatt).
I _{TA.3(z₁)}	Den reducerede spatiale peak temporale gennemsnitsintensitet ved aksial afstand z ₁ (milliwatt pr. kvadratcentimeter).
z ₁	Den aksiale afstand svarende til placeringen af maks. [min(W _{.3(z)} , I _{TA.3(z)} x 1 cm ²)], hvor z ≥ z _{bp} (centimeter).
Z _{bp}	1,69VA _{aprt} (centimeter).
z _{sp}	Den aksiale afstand, hvor TIB er et globalt maksimum (dvs. z _{sp} = z _{B.3}) (centimeter).
z@PII _{.3max}	Den aksiale afstand svarende til maksimumværdien af den reducerede spatiale peak integral-pulsintensitet (megapascal).

Symbol	Beskrivelse
$d_{eq}(z)$	Den tilsvarende strålediameter som funktion af aksial afstand z . Det svarer til $[(4/\pi)(W_o/I_{TA}(z))]^{0.5}$, hvor $I_{TA}(z)$ er den temporale gennemsnitsintensitet som funktion af z (centimeter).
f_c	Midterfrekvens (MHz). For MI er f_c den midterfrekvens, der er forbundet med transmissionsmønstret, som frembringer den globale maksimalt rapporterede værdi af MI. For TI i tilfælde af kombinerede modusser, der involverer transmissionsmønstre med ulige centerfrekvens, defineres f_c som det samlede område med centerfrekvenser for de respektive transmissionsmønstre.
Dim. af A_{aprt}	De aktive for åbningen for dimensioner for azimut- (x) og forhøjede (y) planer (centimeter).
PD	Pulsvarigheden (mikrosekunder) i forbindelse med transmissionsmønstret er bestemmende for den rapporterede MI-værdi.
PRF	Pulsgentagelseshyppigheden i forbindelse med transmissionsmønstret er bestemmende for den rapporterede MI-værdi (Hz).
$p_r@P_{II_{max}}$	Det peak negative tryk på det sted, hvor fri-felts, spatial-peak pulsintensitetsintegralet er maksimalt (megapascal). Se afsnit 6.2.4.1 i Output Display Standard (standard for visning af udgangseffekt) med titlen "Measurement Methodology for Mechanical and Thermal Indices" (målemetode for mekaniske og termiske indikatorer).
$d_{eq}@P_{II_{max}}$	Den ækvivalente strålediameter på det punkt, hvor fri-felts, spatial-peak pulsintensitetsintegralet er maksimalt (centimeter). Se afsnit 6.2.5.1 i Output Display Standard (standard for visning af udgangseffekt) med titlen "Measurement Methodology for Mechanical and Thermal Indices" (målemetode for mekaniske og termiske indikatorer).
FL	Fokallængden, eller azimut- (x) og elevations- (y) længder, hvis de er forskellige (centimeter).
$I_{PA,3}@MI_{max}$	Den reducerede gennemsnitlige pulsintensitet ved det globale maksimalt rapporterede MI (watt pr. kvadratcentimeter).

Den akustiske outputinformation er angivet i nedenstående tabeller for hver sonde/mode-kombination. Disse oplysninger omfatter globale maksimale indeksværdier, tilhørende akustiske parametre og sondeparametre og relevante driftsstyringsforhold.

Tabel 17-10 angiver og beskriver det akustiske outputformat for B-modus.

Sondemodell: Butterfly iQ™

Driftsmodus: B-modus

Tabel 17-10 B-modus

Indeksmærkat			MI	TIS			TIB	TIC
				Scanning	Ikke-scanning		Ikke-scanning	
					A _{aprt} ≤1 cm ²	A _{aprt} >1 cm ²		
Maksimal indeksværdi			0,485	0,02	-	-	-	(a)
Tilknyttet akustisk parameter	Pr. 3	(MPa)	0,718					
	W _o	(mW)		4,40	-		-	(a)
	min af [W _{.3} (z ₁), I _{TA.3} (z ₁)]	(mW)				-		
	z ₁	(cm)				-		
	z _{bp}	(cm)				-		
	z _{sp}	(cm)	5,83				-	
	d _{eq} (z _{sp})	(cm)					-	
	f _c	(MHz)	2,19	2,41	-	-	-	(a)
	Dim af A _{aprt}	X (cm)		2,0	-	-	-	(a)
		Y (cm)		1,3	-	-	-	(a)
Andre oplysninger	PD	(µsec)	0,295					
	PRF	(Hz)	1066					
	p _r @PII _{max}	(MPa)	1,11					
	d _{eq} @PII _{max}	(cm)					-	
	Fokallængde	FLx (cm)		10,0	-	-		
		FLy (cm)		INF	-	-		
	I _{PA.3} @MI _{max}	(W/cm ²)	54,6					
Driftskontr oltilstande	FAST-forudsætninger		✓					
	Bughule dyb			✓				
Bemærk 1:		Det er ikke nødvendigt at stille information til rådighed for alle formuleringer af TIS, der ikke giver den maksimale værdi af TIS for den mode.						

Indeksmærkat			MI	TIS			TIB	TIC
				Scanning	Ikke-scanning		Ikke-scanning	
					$A_{aprt} \leq 1 \text{ cm}^2$	$A_{aprt} > 1 \text{ cm}^2$		
Bemærk 2:	Der er ikke behov for oplysninger om <i>TIC</i> for nogen TRANSDUCERSAMLING, der ikke er beregnet til transkraniale eller neonatale cefale anvendelser.							
Bemærk 3:	Det er ikke nødvendigt at give oplysninger om MI og TI, hvis udstyret opfylder begge fritagelsesklausulerne i 51.2aa) og 51.2 dd).							
(a)	Tiltænkt brug omfatter ikke cefalisk, så TIC beregnes ikke.							

Tabel 17-11 angiver og beskriver det akustiske outputformat for B-modus + farve.

Sondemodell: Butterfly iQ™

Driftsmodus: B-modus + farve

Tabel 17-11 B-modus + farve

Indeksmærkat			MI	TIS			TIB	TIC
				Scanning	Ikke-scanning		Ikke-scanning	
					A _{aprt} ≤1 cm ²	A _{aprt} >1 cm ²		
Maksimal indekssværdi			0,485	-	-	0,13	0,29	(a)
Tilknyttet akustisk parameter	Pr. 3	(MPa)	0,718					
	W _o	(mW)		-	-		17,4	(a)
	min af [W _{.3} (z ₁), I _{TA.3} (z ₁)]	(mW)					0,74	
	z ₁	(cm)					7,8	
	z _{bp}	(cm)					2,76	
	z _{sp}	(cm)	5,83				7,1	
	d _{eq} (z _{sp})	(cm)					1,84	
	f _c	(MHz)	2,19	-	-	2,49	2,49	(a)
	Dim af A _{aprt}	X (cm)		-	-	2,0	2,0	(a)
		Y (cm)		-	-	1,3	1,3	(a)
Andre oplysninger	PD	(μsec)	0,295					
	PRF	(Hz)	1066					
	p _r @PII _{max}	(MPa)	1,11					
	d _{eq} @PII _{max}	(cm)					1,84	
	Fokallængde	FLx (cm)		-	-	10,0		
		FLy (cm)		-	-	10,0		
	I _{PA.3} @MI _{max}	(W/cm ²)	54,6					
Driftskontr oltilstande	FAST-forudsætninger		✓					
	Blære				✓	✓		
Bemærk 1: Det er ikke nødvendigt at stille information til rådighed for alle formuleringer af <i>TIS</i> , der ikke giver den maksimale værdi af <i>TIS</i> for den mode.								

Indeksmærkat			MI	TIS			TIB	TIC
				Scanning	Ikke-scanning		Ikke-scanning	
					$A_{aprt} \leq 1 \text{ cm}^2$	$A_{aprt} > 1 \text{ cm}^2$		
Bemærk 2:	Der er ikke behov for oplysninger om <i>TIC</i> for nogen TRANSDUCERSAMLING, der ikke er beregnet til transkraniale eller neonatale cefale anvendelser.							
Bemærk 3:	Det er ikke nødvendigt at give oplysninger om MI og TI, hvis udstyret opfylder begge fritagelsesklausulerne i 51.2aa) og 51.2 dd).							
(a)	Tiltænkt brug omfatter ikke cefalisk, så TIC beregnes ikke.							

Tabel 17-12 angiver og beskriver det akustiske outputformat for B+M-modus.

Sondemodell Butterfly iQ™

Driftsmodus: B+M-modus

Tabel 17-12 B+M-modus

Indeksmærkat			MI	TIS			TIB	TIC
				Scanning	Ikke-scanning		Ikke-scanning	
					A _{aprt} ≤1 cm ²	A _{aprt} >1 cm ²		
Maksimal indekssværdi			0,485	0,013	-	-	0,012	(a)
Tilknyttet akustisk parameter	Pr. 3	(MPa)	0,718					
	W _o	(mW)		2,64	-		0,63	(a)
	min af [W _{.3} (z ₁), I _{TA,3} (z ₁)]	(mW)				-		
	z ₁	(cm)				-		
	z _{bp}	(cm)				-		
	z _{sp}	(cm)	5,83				8,3	
	d _{eq} (z _{sp})	(cm)					2,1	
	f _c	(MHz)	2,19	2,41	-	-	1,56	(a)
	Dim af A _{aprt}	X (cm)		2,0	-	-	2,5	(a)
		Y (cm)		1,3	-	-	1,3	(a)
Andre oplysninger	PD	(μsec)	0,295					
	PRF	(Hz)	1066					
	P _r @PII _{max}	(MPa)	1,11					
	d _{eq} @PII _{max}	(cm)					2,1	
	Fokallængde	FL _x (cm)		10,0	-	-		
		FL _y (cm)		INF	-	-		
	I _{PA,3} @MI _{max}	(W/cm ²)	54,6					
Driftskontr oltilstande	FAST-forudsætninger		✓					
	Bughule dyb			✓				
	Kardiel THI						✓	
Bemærk 1:			Det er ikke nødvendigt at stille information til rådighed for alle formuleringer af TIS, der ikke giver den maksimale værdi af TIS for den mode.					
Bemærk 2:			Der er ikke behov for oplysninger om TIC for nogen TRANSDUCERSAMLING, der ikke er beregnet til transkraniale eller neonatale cefale anvendelser.					
Bemærk 3:			Det er ikke nødvendigt at give oplysninger om MI og TI, hvis udstyret opfylder begge fritagelsesklausulerne i 51.2aa) og 51.2 dd).					

Tabel 17-12 B+M-modus

Indeksmærkat			MI	TIS			TIB	TIC
				Scanning	Ikke-scanning		Ikke-scanning	
					A _{aprt} ≤1 cm ²	A _{aprt} >1 cm ²		
(a)	Tiltænkt brug omfatter ikke cefalisk, så TIC beregnes ikke.							

Målenøjagtighed

Butterfly iQ™-enheden er designet til at udføre følgende kliniske målinger:

M-modus

- Afstandsmålinger, som er nøjagtige inden for $\pm 3\%$ af den viste værdi.
- Tidsmålinger, som er nøjagtige inden for $\pm 3\%$ af den viste værdi.
- Føtale hjertefrekvensmålinger, som er nøjagtige inden for $\pm 3\%$ af den viste værdi.

B-modus

- Afstandsmålinger (aksiale), som er nøjagtige inden for $\pm 3\%$ af den viste værdi.
- Afstandsmålinger (laterale), som er nøjagtige inden for $\pm 5\%$ af den viste værdi.
- Afstandsmålinger (diagonale), som er nøjagtige inden for $\pm 4\%$ af den viste værdi.
- Afstandsmålinger (omkreds), som er nøjagtige inden for $\pm 5\%$ af den viste værdi.
- Områdemålinger, som er nøjagtige inden for $\pm 10\%$ af den viste værdi.

Farvedoppler

- Relativ strømningshastighed og retning nøjagtig inden for $\pm 20\%$ af den viste værdi.

Sikkerhed

Systemsonde	$I_{SPTA,3}$	TI-type	TI-værdi	MI	$I_{PA,3}@MI_{max}$
Butterfly iQ™	44,9 mW/cm ²	TIB	0,289	0,49	54,6 W/cm ²

Genbrug og bortskaffelse

Genbrug Butterfly iQ™ sonde og tilbehør i slutningen af deres driftslevetid og i overensstemmelse med lokale, regionale og/eller nationale bestemmelser.

Før dele genbruges, skal de være rene og fri for kontaminanter.

Elektrisk og elektronisk udstyrsaffald

Det overkrydsede beholdersymbol med hjul på denne enhed viser, at dette udstyr er blevet markedsført efter den 13. august 2005 og er omfattet af direktiv 2002/96/EØF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og af nationale bekendtgørelser og dekreter, som gennemfører bestemmelserne i dette direktiv. Ved afslutningen på dets driftslevetid må denne enhed ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald, men skal opsamles separat ved særlige autoriserede behandlingsanlæg. Hvis du har brug for hjælp til genbrug, bedes du kontakte producenten eller den autoriserede bortskaffelsesvirksomhed.



Kapitel 18

Symboler

Dette kapitel angiver og beskriver de symboler og ikoner, der kan bruges på Butterfly iQ™-appen, dets tilbehør og emballage.

Symboler

Tabel 18-1 angiver og beskriver et sæt symboler til medicinsk elektronisk udstyr, der klassificerer en forbindelse eller advarer om potentielle farer. Symbolerne i Tabel 18-1 kan anvendes på Butterfly iQ™ og på dets tilbehør og emballage.

Tabel 18-1 Symboler

Symbol	Beskrivelse
	Identificerer en forsigtighedsregel. Angiver behovet for, at brugeren slår op i brugsanvisningen vedrørende vigtige sikkerhedsoplysninger såsom advarsler og forholdsregler.
	Brug ikke enheden, hvis emballagen er beskadiget eller åben.
	Angiver fremstillingsdatoen.
	Angiver, at enheden er skrøbelig og skal håndteres forsigtigt.
	Globalt nomenklaturkodeks for medicinsk udstyr
	Globalt varenummer
IPX7	Nomeringsystemet for beskyttelse mod indtrængning, der viser graden af beskyttelse mod faste genstande og væsker. Det første tal angiver beskyttelsen mod faste genstande, hvor 6 er den højeste beskyttelsessats. Det andet tal angiver beskyttelsen mod væske. 7 angiver, at systemet er beskyttet mod virkningerne af nedsænkning i vand til dybde på mellem 15 cm og 1 meter.

Symbol	Beskrivelse
	Angiver isoleret patientforbindelse (type BF anvendt del).
	Angiver, at enheden skal holdes tør.
	Angiver den juridiske producent.
	Angiver lot eller batchkode.
	Angiver enhedens modelnavn.
	Angiver, at enheden ikke er blevet underkastet en steriliseringsproces.
	Angiver, at brugeren skal slå op i brugsanvisningen.
	Angiver, at enheden skal genbruges.
	Angiver reference- eller katalognummeret.
Rx only	Angiver, at denne enhed ifølge amerikansk lov kun må sælges af eller efter ordination fra en læge.
	Angiver enhedens serienummer.
	Angiver, at enheden skal holdes væk fra sollys eller varme.

Symbol	Beskrivelse
	Angiver, at denne side vender op.
	Angiver, at enheden skal indsamles separat med henblik på bortskaffelse. Følg gældende bortskaffelsesprocedurer.
	Opfylder kravene fra EU-direktivet om medicinsk udstyr.
	Autoriseret europæisk repræsentant: Emergo Europe Prinsessegracht 20 2514 AP The Hague Holland
	Australsk sponsor: Emergo Australia Level 20, Tower II Darling Park 201 Sussex Street Sydney, NSW 2000 Australien

Noter

A

- Åbning af app, 4-3
- Adgangskode, glemt, 4-4
- Adgangsniveau
 - udskiftning af medlem i Butterfly Cloud, 13-6
 - visning af Butterfly Cloud-medlem, 13-6
- Afslutning af en undersøgelse, 6-8
- Akustisk udgangseffekt, 17-8
 - B-modus, 17-11
 - Farveflow-modus, 17-13
 - M-modus, 17-15
- Anbefalede ultralydsgeler, 17-3
- Anmærkninger
 - tilføjelse i app, 7-1
- Anmod om hjælp, 4-5
- App
 - åbning og lukning, 4-3
 - fejlfinding, 15-1
 - håndtering af opdateringer, 4-2
 - hentning og installation af appen, 4-1
 - kontakte Butterfly Support, 16-1
 - logge på og af, 4-3
 - opdatering, 14-4
 - oversigt, 3-3
- Arbejdslistes, valg af patient, 6-3
- Arkiver
 - flytning af arkiver mellem, 5-2, 13-11
 - genoprettelse af slettet, 13-8
 - oprettelse af ny i Butterfly Cloud, 13-7
 - sletning, 13-7
 - sletning af en undersøgelse, 12-4
- Automatiske ejektionsfraktioner
 - beregning, 8-1
 - oversigt, 8-1

B

- Batteri
 - batteriopladerens specifikationer, 17-2
 - indikator på sonde, 4-8
 - oplader, 3-5
 - opladning af sonden, 4-8
- Beregning
 - Automatiske ejektionsfraktioner, 8-1
 - Simpsons EF, 8-1
- Berøringsskærm, 4-3
- Billeddannelsesvisning, 3-6
- Billeder
 - deling fra Butterfly Cloud, 13-10
 - frysning og frigørelse, 6-6

- gennemgang af rammer fra frosne, 6-6
- tilføjelse af anmærkninger (i app), 7-1
- visning i Butterfly Cloud, 13-13
- visning og tilføjelse af kommentarer, 12-4

- Biologisk sikkerhed, 2-6
- B-modus, målenøjagtighed, 17-17
- Bortskaffelse af systemet, 17-17
- Brugertilpasset timeout for inaktivitet, 5-1
- Brugervejledning, 4-5
- Brugsbetingelser, 4-5
- Butterfly Cloud, 12-1
 - adgang til, 13-2
 - ændring af et medlems adgangsniveau, 13-6
 - deling af billeder og klip, 13-10
 - DICOM-forbindelser, 13-4
 - hentning af undersøgelser, 13-13
 - indtastning af kommentarer på billeder og klip, 13-13
 - konfigurering af kontoindstillinger, 13-3
 - konfigurering af mailmeddelelser, 13-3, 13-4
 - logge på og af, 13-2
 - Notification Center (Meddelelsescenter), 13-14
 - oprettelse af nyt arkiv, 13-7
 - oversigt, 1-1, 12-1, 13-1
 - sletning af undersøgelser, 13-12
 - søgning efter undersøgelser, 13-9
 - tilføjelse af nyt medlem, 13-6
 - URL, 13-2
 - visning af billeder, klip og kommentarer, 13-13
 - visning af et medlems adgangsniveau, 13-6
 - visning af medlemmer, 13-6
- Butterfly Cloud Enterprise, 5-1
- Butterfly Support
 - indsendelse af en anmodning, 16-1
 - kontakte, 16-1
 - kontakte gennem app, 16-1
- Butterfly-domæner, 5-1

C

- Cybersikkerhed, 3-3

D

- Deling af billeder og klip fra Butterfly Cloud, 13-10
- Desinficering af sonden, 14-4
- DICOM-forbindelser, 13-4
- Driftsmiljø, 17-4
- Dybde, 6-5

E

- EF-A4C
 - redigeringsmåling, 8-3

Elektromagnetisk immunitet, 17-5
Elektromagnetisk konformitet (EMC), 17-4
Elektromagnetiske emissioner, 17-5
Ellipsemålinger (i app), 7-2
Elsikkerhed, 2-4
Enkeltlogon (SSO), 5-1
Enterprise Mobile Management (EMM), 5-2
EU-kunder, 17-18

F

Farvedoppler
 adgang til, 9-1
 justering af overlejring, 9-1
 justering af PRF, 9-2
 oversigt, 9-1, 10-1
Fejlfinding, 15-1
Firmware, opdaterer, 4-2
Flådeadministration, 5-2
Fødselsdato, 6-2
Forstærkning, 6-4
Fortrolighedspolitik, 4-5
Forudindstillinger
 ændring, 6-1
 inkluderet, 3-8
 konfigurering af indstillinger, 4-5
Foto, tilføjelse af profil-, 13-3
Frigørelse af billeder, 6-6
Frysning af billeder, 6-6
Fuldførelse af en undersøgelse, 6-8

G

Geler, anbefalede ultralyds-, 17-3
Genbrug af systemet, 17-17
Gennemgang af rammer fra et frosset billede, 6-6
Genoprettelse
 slettede undersøgelser, 13-12
 slettet arkiv, 13-8
Glemte adgangskode, 4-4

H

Hastighedsskala, justering i Power Doppler, 10-2
Hentning af app, 4-1
Hjælp, 4-5, 16-1

I

Ikoner, 18-1
Indikationer, 1-2
Indstillingen Auto-Freeze (Frys automatisk), 4-4
Indstillinger, konfigurering af system, 4-4

Installation af app, 4-1
Internetkonnektivitet, 3-2

J

Justering
 Dybde, 6-5
 Forstærkning, 6-4
 PRF, 9-2
 Sweep Speed (Sweep-hastighed), 11-2
 TGC, 6-5

K

Klip
 deling fra Butterfly Cloud, 13-10
 optagelse, 6-3
 visning i Butterfly Cloud, 13-13
Kommentarer
 indtastning i Butterfly Cloud, 13-13
 konfigurering af meddelelser, 4-5
 opslåning, 12-4
 tilføjelse til billeder, 12-4
 visning på billeder, 12-4
Kommentarmeddelelser, 4-5
Konfigurering
 af systemindstillinger, 4-4
 Butterfly Cloud-kontoindstillinger, 13-3
 forudindstillinger, 4-5
Kontoindstillinger, konfigurering af Butterfly Cloud, 13-3
Kontraindikationer, 1-2
Krav, mobilenhed, 17-1
Kvalitetsindikator, 8-1

L

Lær grundlæggende funktioner i Butterfly iQ, 4-5
Lineære målinger (i app), 7-1
Logge på og af, app, 4-3
Logge på og af, Butterfly Cloud, 13-2
Lukning af app, 4-3

M

Mailmeddelelser, konfigurering af Butterfly Cloud, 5-2, 13-3, 13-4
Målenøjagtighed, 17-17
Målinger
 ellipse (i app), 7-2
 lineær (i app), 7-1
 oversigt, 3-1
 udførelse af M-modus, 11-2
Manuel måling med Simpsons metode, 8-4
Medlemmer
 tilføjelse af ny til Butterfly Cloud, 13-6

- visning af Butterfly Cloud, 13-6
- Midterlinjeværktøj, 6-7
- M-modus
 - adgang til, 11-1
 - justering af Sweep Speed (Sweep-hastighed), 11-2
 - målenøjagtighed, 17-17
 - oversigt, 11-1
 - udførelse af målinger, 11-2
- Mobilenhed
 - konfigurering af indstillinger, 4-4
 - krav, 17-1
- Modusser
 - B-modus, 6-1
 - Farvedoppler, 9-1
 - M-modus, 11-1
 - oversigt, 3-1
 - Power Doppler, 10-1
- MRN, 6-2
- My iQ (Min iQ), 4-4

N

- Notification Center (Meddelelsescenter), 13-14
- Ny undersøgelse, 6-1

O

- Opbevaring af sonden, 14-1
- Opdatering af app, 14-4
- Opdateringer, håndtering af app, 4-2
- Operatørens sikkerhed, 2-6
- Opladning af sonden, 4-6
- Opretter forbindelse til Butterfly Cloud, 13-2
- Opslåningskommentarer, 12-4
- Opstart af ny undersøgelse, 6-1
- Optageenhed
 - anvendelse af, 6-4
 - arkivering af en undersøgelse, 6-8
- Optagelse af et klip, 6-3
- Orienteringsmarkør, 6-1
- Overfør undersøgelser over mobilnetværk, 4-4
- Overførsel af
 - Butterfly Cloud, 12-1
 - visning af status, 12-2

P

- Panorering, 6-5
- Patientdata
 - indtastning, 6-2
 - manuel tilføjelse, 6-2
 - tilføjelse fra en arbejdsliste, 6-3
- Patientens navn, 6-2

- Power Doppler
 - adgang til, 10-1
 - justering af hastighedsskala, 10-2
 - justering af overlejring, 10-1
- Præferencer, konfigurering af, 4-4
- PRF, justering under farvedoppler, 9-2
- Profilmfoto, tilføjelse af, 13-3

R

- Rapporter en fejl, 4-5
- Rapportering for medicinsk udstyr, 16-1
- Redigering af automatisk estimerede ejektionsfraktioner, 8-3
- Rengøring af sonden, 14-3
- ROI (region af interesse), 6-5

S

- Salg, 16-1
- Send feedback, 4-5
- Separationsafstande, 17-6
- Service, 16-1
- Sikkerhed, 3-3
 - Biologisk, 2-6
 - defibrillering, 2-5
 - elektrisk, 2-4
 - konventioner, 2-1
 - operatør, 2-6
 - specifikationer, 17-17
 - system, 2-2
 - udstyrsbeskyttelse, 2-5
- Sikkerhed ved defibrillering, 2-5
- Sikkerhed ved udstyrsbeskyttelse, 2-5
- Sikkerhed ved ultralydsbehandling, 4-5
- Simpsons EF
 - beregning, 8-1
- Simpsons monoplanmetode, 8-1, 8-3
- Sletning
 - arkiver, 13-7
 - arkiverede undersøgelser, 12-4
- Slutbrugerlicensaftale, 4-5
- Sonde
 - batteriindikatorlamper, 4-8
 - batterioplader, 3-5
 - desinficering, 14-4
 - Diagnostisk undersøgelse, 14-5
 - fejlfinding, 15-1, 15-2
 - identificering af dele af, 14-2
 - opbevaring, 14-1
 - opdatering af firmware, 4-2
 - opladning, 4-6
 - oversigt, 3-2, 3-4

- rengøring, 14-3
- Selvtest, 14-5
- specifikationer for batterioplader, 17-2
- testning, 14-5
- tilslutning, 4-1
- transport af, 14-1
- Specifikationer
 - driftsmiljø, 17-4
 - krav til mobilenhed, 17-1
 - sondens batterioplader, 17-2
 - System, 17-2
- Support, 16-1
- Sweep Speed (Sweep-hastighed), justering under M-modus, 11-2
- Symboler, 17-9, 18-1
- System
 - genbrug og bortskaffelse, 17-17
 - komponenter, 3-1, 3-3
 - sikkerhed, 2-2
 - specifikationer, 17-2

T

- Testning, udførelse af diagnostisk test på sonde, 14-5
- TGC, justering under levende billeddannelse, 6-5
- Tilføj oplysninger fra arbejdsliste, 6-2
- Tilføj oplysninger manuelt, 6-2
- Tilføjelse af et profilfoto, 13-3
- Tilslutter sonde, 4-1
- Tiltænkt brug, 1-1
- Tiltrædelsesnr., 6-2
- Trådløs konnektivitet, 3-2
- Transport af sonden, 14-1

U

- Udbakke, 12-2
- Uddannelse, 1-2
- Udførelse af målinger
 - ellipse (i app), 7-2
 - lineær (i app), 7-1
 - M-modus, 11-2
- Ultralydsgeler, anbefalede, 17-3
- Ultralydssikkerhed, 17-8
- Undersøgelser
 - flytning mellem arkiver, 5-2, 13-11
 - fuldførelse, 6-8
 - gemme til Butterfly Cloud, 6-8
 - genoprettelse af slettet, 13-12
 - hentning fra Butterfly Cloud, 13-13
 - opstart af ny, 6-1
 - overførsel af, 12-1
 - sletning af arkiveret, 12-4

- sletning i Butterfly Cloud, 13-12
- søgning efter i Butterfly Cloud, 13-9
- visning overført, 12-3

V

- Vis forstørrelsesglas, 4-4
- Visning af en overført undersøgelse, 12-3
- Visning af status for arkivoverførsel, 12-2

Z

- Zoome ind, 6-5
- Zoome ud, 6-5